

Katalog pomagala za djecu

Rehabilitacija
Ortopedska obuća
Inkontinencija





Sadržaj

Kolica s posebnom prilagodbom sjedišta

ZIPPIE RS + JAY FIT 2U	5
------------------------------	---

Modularna kolica

BUG	8
GILLO POSTURAL SYSTEM	10
CHILLA	12
TARTA ACTIVE	14
TARTA ORIGINAL JUNIOR	15

Kolica s posebnom prilagodbom

NOVUS	18
JUDITTA	19
COMFORT	20
TROLLINO	22
OBI	23
CLIP	24
WEGO	25

Dječja aktivna kolica

YOUNGSTER 3	28
SCOOOT	29

Hodalice i pomagala za kretanje

GRILLO	32
DYNAMICO	33
CROCODILE	34
MUSTANG	35
MARCY	36
BIRILLO	37
KRABAT PILOT	38
KRABAT PIRAT	39
TRICIKL BIKO	40
UPSEE	42
FRAME RUNNER	43

Stajalice

APP	46
MEERKAT	47
TOUCAN	48
RABBIT	49

Sustavi za sjedenje

GOTO	52
PLAYPAK	53
SITTER	54
LINER	55
RADNI STOLIĆ	56
GRILLO CHAIR	57

Autosjedalice

IPAI MAX	60
KIDSFLEX	61

Pomagala za kupaoinicu

SPLASHY	64
SPLASHY BIG	65
OTTER	66
GOTTAGO	67

Ortopedska obuća za djecu

No.041	70
No.043	71
No.046	72
No.047	73
Lavandon Karla, roze	74
Lavandon Pčelica	75
Star	76

Pelene za djecu i podmetači

SENI	79
------------	----



Kolica s posebnom prilagodбом sjedišta



ZIPPIE RS + JAY FIT 2U

Dječja invalidska kolica s posebnom namjenom



Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta **ZIPPIE RS** imaju aluminijsko podvozje, s tiltom sjedišta koje omogućava mijenjanje kuta sjedišta bez promjene balansa samih kolica, čime se smanjuje pritisak ispod zdjelice (prevencija dekubitusa i spazama), olakšavaju funkcije hranjenja i disanja, omogućavaju promjene položaja kako bi korisnik proveo manje vremena u jednom položaju onda kada dijete samo ne može prebacivati težinu.


JAY FIT 2U je naslon za leđa od isprepletenih umetaka za stvaranje individualnih kontura i potpore. Idealno za složene posturalne potpore poput asimetrije kralježnice/trupa, skolioze, kifoze, luksacije, subluksacije jednog ili obaju zglobova kuka, asimetrije prsnog koša ili zdjelice; za osobe čije promjene običan naslon ne može pratiti.

Širina sjedišta	30-40 cm
Dubina sjedišta	37,5-45 cm
Visina leđnog naslona	30-55 cm
Tilt sjedišta	do 40°
Maksimalna nosivost	125 kg



Modularna kolica



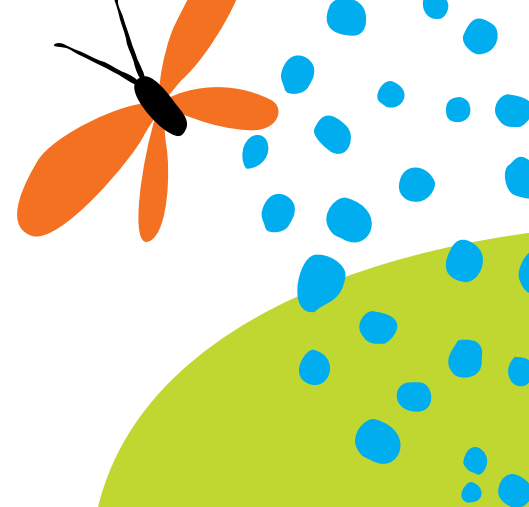



BUG

**Modularna kolica
za prilagodbu
i pozicioniranje**




Bug ima vlastiti stil koji ujedinjuje tradicionalni izgled kolica sa modernim elementima. Svaki njegov detalj zrači dinamikom, naglašavajući pritom aktivni životni stil korisnika. Bug je savršeno prikladan za personalizaciju, a kombinacijom boje preslake i dodatnom opremom spremno će odgovoriti na sve zahtjeve.

Širok raspon dodatka omogućuje prilagodbu kolica točno prema potrebama korisnika; na taj način u svakom trenutku pruža optimalnu podršku korisniku. Bug će biti vjeran suputnik i asistent prilikom svladavanja svakodnevnih životnih izazova.

Radne baze 851 i 856 podesive su po visini kako bi korisnik mogao pristupiti radnim površinama različite visine ovisno o potrebi i zahtjevima. Radne baze su jednostavne za korištenje i sigurne za uporabu zahvaljujući mehanizmu podešavanja plinskom polugom.

Plinska poluga pruža jednostavnu i sigurnu promjenu položaja sjedenja bez straha od naglih ili nekontroliranih pokreta. Fleksibilne pelote za trup omogućuju stabilizaciju trupa čak i u najzahtjevnijim situacijama.

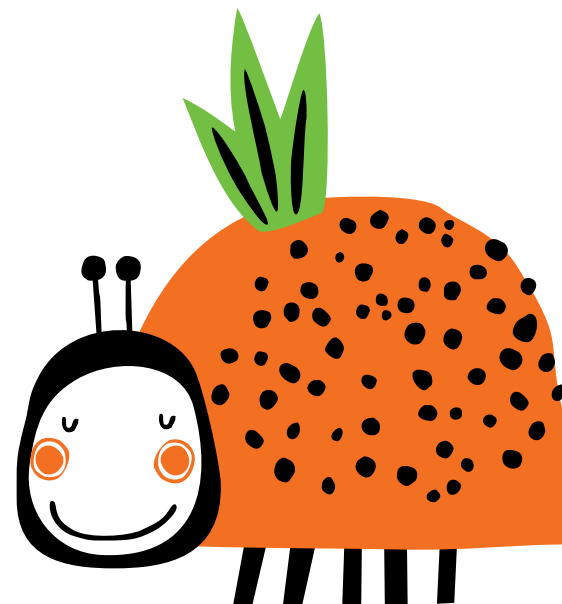



- Odvojivo sjedalo postavljeno na tri uporišta, brzo i jednostavno skidanje i postavljanje
- Sjedalo s podesivim nagibom, širinom i dubinom
- Sklopivi aluminijski okvir
- Širok raspon dodataka za prilagodbu kolica prema korisniku
- 2 veličine
- 1 model vanjskog podvozja + 2 modela radnih baza
- 2 boje presvlake, uz 4 izbora boja detalja
- Prozračna navlaka izrađena od visokokvalitetne tkanine

	BUG SMALL	BUG MEDIUM
ŠIRINA SJEDIŠTA	20-30 cm	25-36 cm
DUBINA SJEDIŠTA	20-30 cm	30-40 cm
VISINA NASLONA	52-62 cm	60-75 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	14-30 cm	20-38 cm



GRILLO POSTURAL SYSTEM

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje




Grillo Postural System je modularni posturalni sustav namijenjen djeci od najranije dobi pružajući im svu potporu.

Širok raspon dodatka omogućuje prilagodbu kolica točno prema potrebama korisnika, uz tilt-in-space, te nagib lednog naslona pomoću plinske poluge. Sjedište je podesivo po širini, dubini, te je dostupno u 3 različite veličine, a može se postaviti na dvije baze: jednu za unutarnju i jednu za vanjsku upotrebu.

Sjedište na vanjskom podvozju može biti okrenuto prema roditelju, kao i u smjeru vožnje. Jednostavno se sklapa, te je idealan suputnik i asistent u savladavanju svakodnevnih izazova.

- > **3 boje:** roza, plava, smeđa
- > **2 baze:** unutarnja radna baza i vanjsko podvozje

	MINI	SMALL	MEDIUM
Visina korisnika	75-105 cm	90-120 cm	115-140 cm
Težina korisnika	25 kg	do 35 kg	24 - 42 cm
Širina sjedišta	16-26 cm	20-30 cm	25-35 cm
Dubina sjedišta	16-26 cm	20-30 cm	28-40 cm

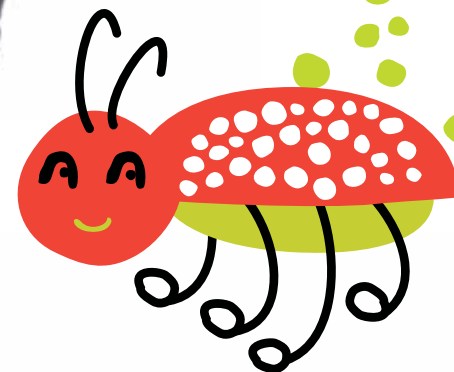




CHILLA

Modularna kolica
za prilagodbu i pozicioniranje


	CHILLA 1	CHILLA 2
Širina sjedišta	33 cm	38 cm
Dubina sjedišta	18 - 34 cm	24 - 42 cm
Visina leđnog naslona	36,5 - 66,5 cm	42 - 81 cm
Nosivost	43 kg	60 kg
Težina kolica	9,2 kg	10 kg

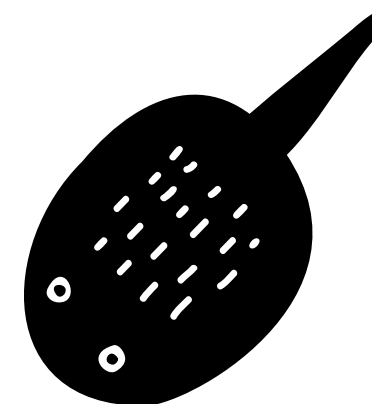


Chilla su vrhunski osmišljena kolica, stiliziranog futurističkog dizajna koja privlače korisnike diljem svijeta. Karbonsko podvozje s amortizerima dizajnirano je za kretanje i po zahtjevnijim terenima te potiče obitelj korisnika na aktivan život. Pažnja posvećena dizajnu svakog detalja osvaja na prvi pogled, a s vremenom prerasta u istinsko oduševljenje.

Prilagodljivost korisniku, udobnost i lakoća upravljanja ključne su riječi koje opisuju ova kolica. Brojne prilagodbe kuta sjedenja pružaju djetetu idealan položaj dok mu razni dodatci omogućuju optimalnu podršku za stabilizaciju trupa.



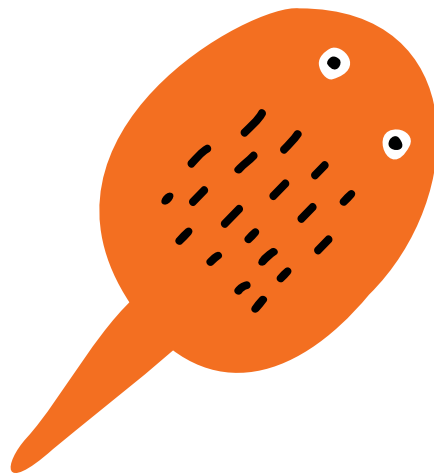


- Odvojivo sjedište sa opcijama nagiba naslona i nagiba cijelog sjedišta
- Karbonsko podvozje s amortizerima ili unutarnje podvozje podesivo po visini
- Sustav pelota za trup i zdjelicu, zajedno sa raznim remenčićima za trup pružaju optimalnu stabilizaciju korisnika
- Prilagodljivi i podesivi nasloni za glavu
- Dvije veličine sjedišta s dodatno podesivom širinom i dubinom
- 4 boje: crvena, crna, plava, roza
- Širok raspon dodatka
- 2 veličine

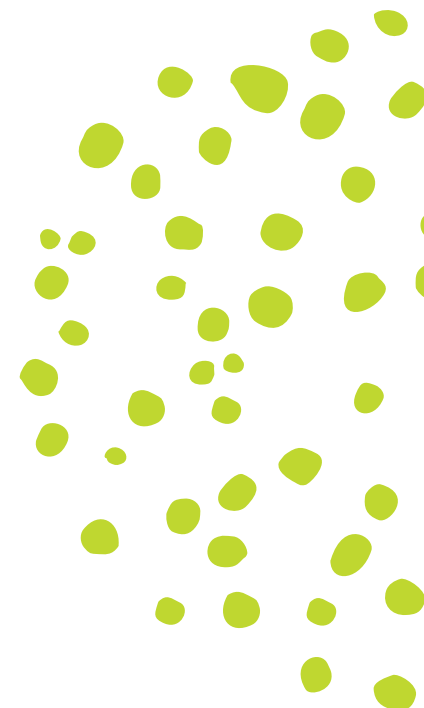

TARTA Active

Naslon

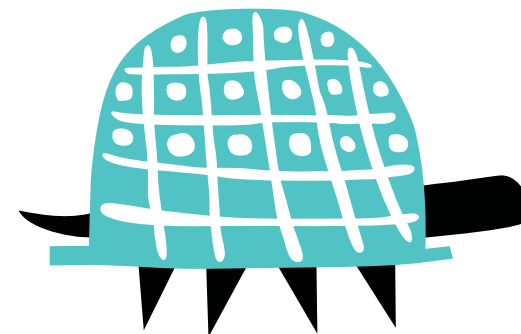

Tarta Active je lagan, a u isto vrijeme snažan naslon napravljen u potpunosti od aluminija. Prema potrebama na Tarta Active naslon se mogu staviti potporne pelote za trup.

Presvučen je visokokvalitetnom pjenom perive presvlake.

Naslon Tarta Active odgovara za širinu sjedišta aktivnih kolica već od 27 cm.

Naslon Tarta Active je moguće montirati na fiksni i sklopivi okvir kolica.



TARTA Original Junior

Naslon



Tarta Original Junior je najfleksibilniji naslon za leđa na svijetu! Središnji stup osigurava slobodu pokreta i potporu za poboljšanje kvalitete života korisnika. Svaki dio se može prilagoditi korisniku jednostavnim podešavanjem uz minimalno korištenje alata.

Tarta Original Junior se može naručiti u standardnoj dubini ili Contour za veću posturalnu potporu.

Tarta Original Junior se može montirati na fiksni i sklopivi okvir kolica

- Može se montirati na aktivna kolica širine sjedišta od **28 cm**.
- Tarta Original Junior je proizveden od aluminija s meko podstavljenim jastučićima prekrivenim perivom tkaninom.



Kolica s posebnom prilagodbom







NOVUS

Kolica za kontrolu držanja tijela



ŠIRINA SJEDIŠTA	28-38 cm
DUBINA SJEDIŠTA	39-45 cm
VISINA NASLONA	75-81 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	30-44 cm
VISINA KORISNIKA	145-170 cm

Novus su praktična i prilagodljiva dječja kolica posebno dizajnirana za djecu adolescentske dobi. Kada većina dječjih kolica prestaje s rastom Novus nastavlja i dalje protežući se na čak 65 kg nosivosti, proporcionalno prateći i ostale dimenzije djeteta. Jednostavna za uporabu, sklapanje i transport Novus je vjerni suputnik u svim izazovima.

Čvrsti naslon i sjedište te širok raspon dodatka omogućuju odličnu prilagodbu Novusa tijelu korisnika i potrebama roditelja. Čvrsta izrada, lagani materijali i izrazita dugotrajnost čine ova kolica idealnim supnikom na duge staze.

- Sklopivi aluminijski okvir
- Čvrsti naslon s podesivim nagibom i visinom
- Sjedalo podesive dubine i visine naslona
- Prozračna navlaka izrađena od visokokvalitetne tkanine
- Podesivi oslonci za noge
- Uklonjivi kotači sa blokiranjem smjera
- Bubaanj kočnice
- Širok raspon dodatka
- 1 veličina

JUDITTA

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom za djecu i odrasle



Juditta su udobna invalidska kolica s posebnom prilagodbom od visokoelastičnih užadi koja čine sjedalo prilagođeno anatomiji svakog korisnika, sprječavajući pojavu dekubitusa.

Imaju nagib leđnog naslona i tilt sjedišta koji podržavaju pravilno držanje, pružaju stabilnost i sprječava kontrakture i nastanak deformiteta.

Težina korisnika ravnomjerno je raspoređena po sjedištu i naslonu, smanjujući pritisak na donji dio leđa i kukove.

Poseban oblik i materijal sjedišta sprječava stvaranje pritiska duž cijele kralježnice.


Širina sjedišta	36/40/45/50
Dubina sjedišta	40/43/46/49
Visina leđnog naslona	47/47/52/57
Nosivost	do 120 ili 140 kg

Dostupna su **3 podvozja**, različita po veličini prednjih i stražnjih kotača.

- **B12:** prednji i stražnji kotači 5"
- **B30:** prednji kotači 8", stražnji kotači 12"
- **B60:** prednji kotači 8", stražnji kotači 22"

COMFORT

Dječja invalidska kolica
sa posebnom namjenom

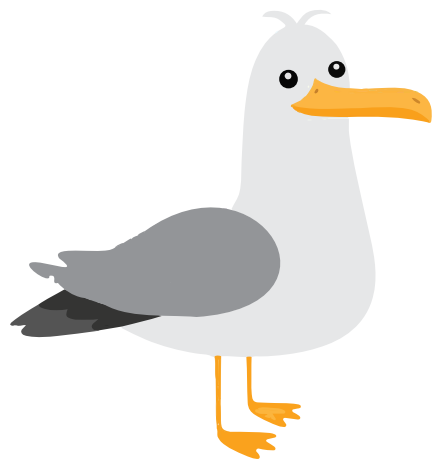

Udobna, funkcionalna i ergonomiska kolica s posebnom prilagodbom za djecu.

Savršena za šetnju po gradu ili neravnim terenima, ali i u zatvorenim prostorima.


Konfiguracija: naslon za glavu, abdukcijski klin, prednji metalni štitnik, pojas, košara.

➤ Dostupna u 8 veličina

➤ Dostupno u 9 boja



Širina sjedišta	33,5 - 52,5 cm
Dubina sjedišta	27 - 48 cm
Visina leđnog naslona	55 - 83 cm
Visina oslonca za stopala	23 - 46,5 cm
Težina samih kolica	15 - 32 kg
Visina leđnog naslona	55 - 83 cm
Maksimalna nosivost	30 - 130 kg
Visina korisnika	110 - 180 cm

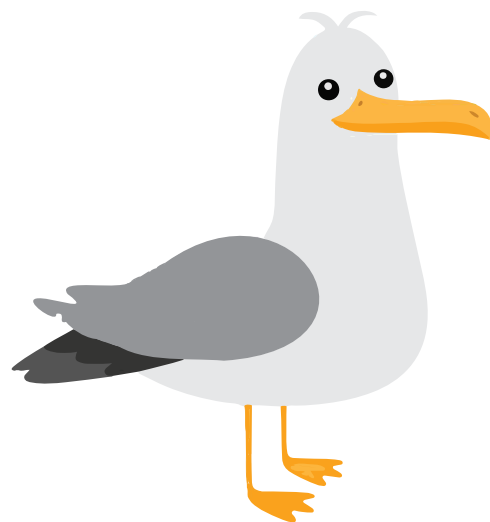



TROLLINO

Kolica sa posebnom
prilagodbom

- Podstava je izrađena od tehnološki naprednih materijala koji su iznimno prozračni, otporni i jednostavni za održavanje
- Dostupna u 4 boje: crvena, plava, roza i crna

Trollino su kompaktna i lagana kolica namijenjena za svakodnevnu uporabu djece i tinejdžerima.

Lagan aluminijski okvir odlikuje iznimna čvrstoća pa je Trollino odličan izbor bez obzira na zahtjevnost terena kojim se krećete.

Jednostavno rukovanje omogućeno je patentiranim sustavom pomoću kojega kolica možete sklopiti ili rasklopiti u samo jednom potezu te na taj način zauzimaju minimalan prostor.

**Stabilnost, praktičnost i udobnost,
sve integrirano u jedna kolica.**

ŠIRINA SJEDIŠTA	38,5 cm
DUBINA SJEDIŠTA	30-40 cm
VISINA NASLONA	55-65 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	24-34 cm





OBI


Kolica sa posebnom prilagodbom

Obi su kompaktna, čvrsta i jednostavna kolica čiji dizajn pruža potporu uspravnom sjedenju. Kolica su opremljena raznim dodatcima kako bi se sjedište dodatno prilagodilo djetetu te kako bi dijete zadržalo odgovarajući položaj u kolicima. Obi je dostupan u 3 različite veličine te ne zauzima puno prostora kada je sklopljen.

Šarene i vesele boje s naglaskom na praktičnost i funkcionalnost kolica omogućuje jednostavnije savladavanje svakodnevnih izazova.

	OBI 2	OBI 3	OBI 4
ŠIRINA SJEDIŠTA	33 cm	37 cm	41 cm
DUBINA SJEDIŠTA	30 cm	36 cm	40 cm
VISINA NASLONA	62 cm	68 cm	76 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	23-35 cm	29-44 cm	32-47 cm

- Sklopivi čelični okvir
- Periva navlaka otporna na vatru
- Kruti naslonjač s podesivim nagibom
- Čvrsto fiksirano sjedalo
- Podesivi oslonac za noge
- Širok raspon dodataka
- 3 veličine
- Uz kolica dolazi i abdukcijski klin, naslon za glavu te H pojas

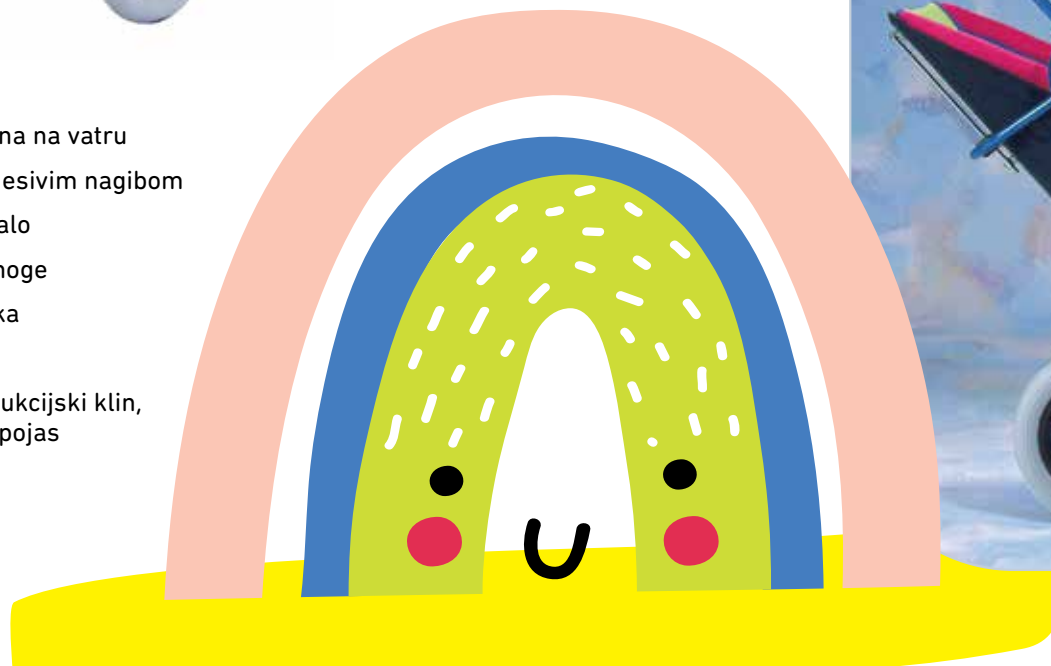

CLIP

Kolica sa posebnom prilagodbom



	CLIP 1	CLIP 2	CLIP 3	CLIP 4
ŠIRINA SJEDIŠTA	30 cm	33 cm	36 cm	45 cm
DUBINA SJEDIŠTA	25 cm	30 cm	35 cm	38 cm
VISINA NASLONA	55 cm	59 cm	64 cm	70 cm
DULJINA OSLOPCA ZA STOPALA	15-23 cm	21-31 cm	27-37 cm	36-48 cm

Clip su lagana i sklopiva dječja kolica idealna za transport korisnika. Pojačanja u sjedištu i naslonu omogućuju pravilan položaj sjedenja. Nagib naslona i širok izbor dodataka omogućuju pozicioniranje korisnika u optimalan položaj. Clip dolazi u 4 veličine kako bi pratio rast i razvoj djeteta.

Clip je idealno pomagalo za djecu i roditelje koji su stalno u pokretu. Lagana i okretna kolica brzo se i lako sklapaju te ne zauzimaju puno mjesta kada su sklopljena.

- Lagani aluminijski sklopivi okvir
- Jednostavna za guranje i sklapanje prilikom transporta
- Ručke za guranje podesive po visini
- Polukruti naslonjač i sjedalo s odvojivim aluminijskim potpornim šipkama
- Podesivi naslon s patentnim zatvaračem za jednostavnu uporabu
- Higijenska i prozirna navlaka koja se lako suši
- Odvojivi oslonac za noge podesive visine
- Širok raspon dodataka
- 4 veličine



WEGO

Kolica sa posebnom prilagodbom





ŠIRINA SJEDIŠTA	35 cm
DUBINA SJEDIŠTA	26 cm
VISINA NASLONA	50 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	20/25 cm

WeGo su lagana transportna kolica atraktivnog izgleda sa mnoštvom iznenađenja. WeGo je dizajniran za pružanje potpore u sjedenju djeci do 30 kg, a za situacije kada vam treba malo više potpore WeGo se udružuje sa GoTo sjedištem kako bi djetetu pružio potporu i udobnost.

GoTo sjedište nježno grli vaše dijete i pruža mu podršku prilikom sjedenja u kolicima i izvan njih.

Dječja aktivna kolica

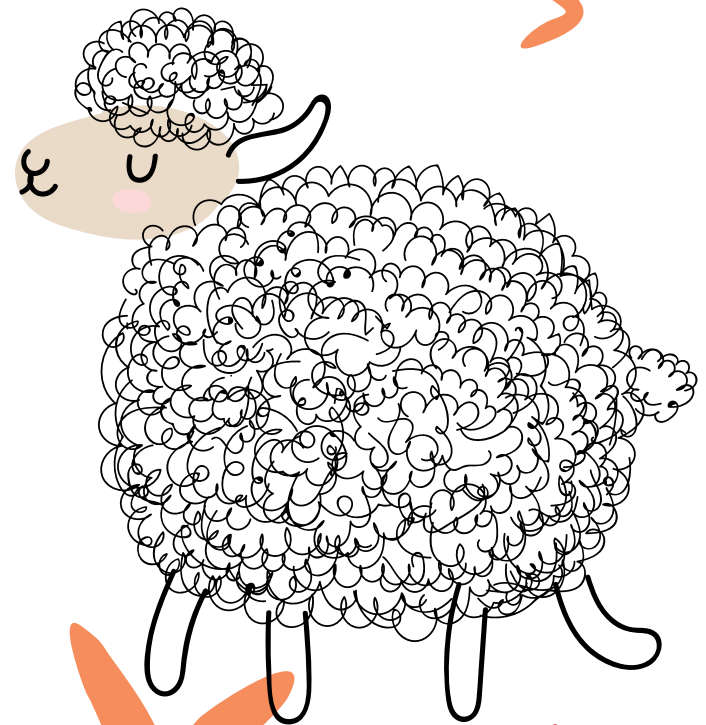

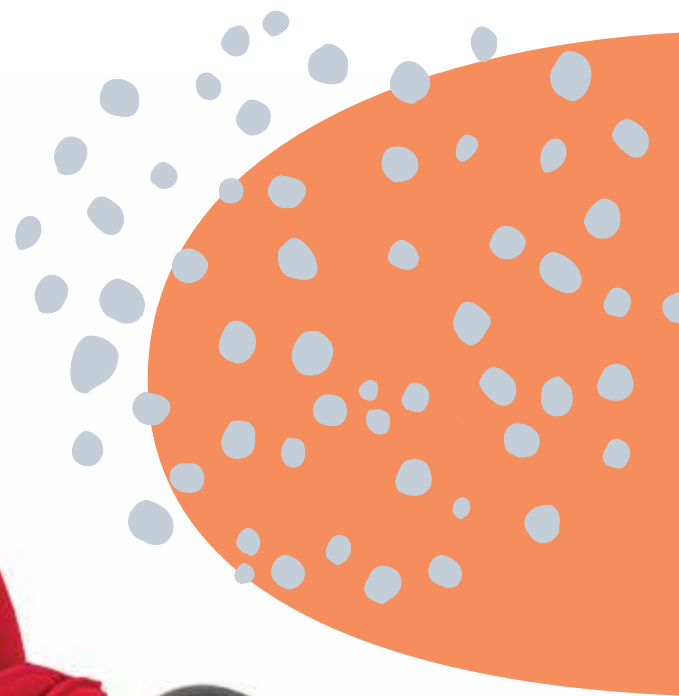

YOUNGSTER 3

Dječja aktivna kolica



Mogućnost
odabira različitih
zaštita za žbice

ŠIRINA SJEDIŠTA	22-40 cm
DUBINA SJEDIŠTA	24-40 cm
VISINA NASLONA	22,5-42,5 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	11-44 cm



Youngster spaja prekrasan dizajn i izvrsne vozne performanse u najlakša kolica za aktivne korisnike. Čistoća dizajna modela Youngster konzistentna je od glave do pete. Blage linije okvira besprijekorno se spajaju sa stilski dotjeranim naslonom i laganim kotačima. Rezultat je sportski izgled i iznimna pokretljivost kolica.

Lagani okvir i lagani kotači omogućuju korisniku veću pokretljivost dok mu istovremeno blage linije i širok izbor boja kolica daju priliku da izrazi svoju osobnost.

SCOOOT

Dječja aktivna kolica



Scoot su kolica prilagođena djeci sa teškoćama u razvoju, dizajnirana kako bi pomogla djeci u igri, istraživanju i sudjelovanju u aktivnostima, a da najbolje odgovaraju njihovim tjelesnim i kognitivnim sposobnostima.

Namijenjena su djeci od 2 do 6 godina maksimalne tjelesne težine 22 kg. Scoot se može koristiti u prirodi, na ravnim površinama kao što su drvo ili beton.

Scoot-ov 4-u-1 dizajn omogućava 4 puta više zabave i 4 puta više prilika da vaše dijete iskoristi svoj puni potencijal. Scoot se može podesiti u 4 različite konfiguracije – Scoot, Crawl, Ride i Pooosh.

ŠIRINA SJEDIŠTA	23 cm
DUBINA SJEDIŠTA	40 cm
VISINA NASLONA	30 cm



Hodalice i pomagala za kretanje





GRILLO

Hodalica



Kombinacija naglašenih oblina i skladno oblikovanih rubova – to je karakterističan stil nove Grillo hodalice koja bez iznimke privlači poglede i interes. Moćna kostrukcija zajedno s dodatcima za posebnu prilagodbu hodalice potrebama korisnika ostavlja doista upečatljiv dojam. Sofisticirani dizajn skladno spaja otmjenost sa aktivnošću korisnika.

Grillo dolazi u 7 različitih verzija, 2 modela (front drive i posterior) te 3 okvira koji zadovoljavaju sve uzraste korisnika, od djece do odraslih osoba.

Širok raspon podešavanja visine za svaku veličinu. Grillo će pratiti razvoj i biti idealan suputnik dugi niz godina.

- Sklopivi aluminijski okvir
- Grillo se može sklopiti samo jednim pokretom, smanjujući time dimenzije za skladištenje i transport
- Sigurna i udobna za korisnika
- Težište tijela ostaje nepromijenjeno prilikom podešavanja visine okvira
- Jednostavno rukovanje, opremljena sa više šipki koje omogućuju postavljanje odgovarajuće visine za korisnika u skladu s njegovim specifičnim dimenzijama
- Precizno i postojano podešavanje, bez uporabe alata
- Patentirani sustav podešavanja visine pomoću plinske opruge omogućuje kontrolu držanja tijela, bilo u statičkoj ili dinamičkoj fazi





DYNAMICO

Hodalica



Dynamico je osmišljen kako bi mijenjao način na koji se njegovi korisnici kreću kroz život. Sa svojom čvrstoćom i stabilnošću pomaže djetetu ostvariti stajanje i prve korake s više samopouzdanja i sigurnosti što mu omogućuje nova iskustva i veću povezanost sa svijetom oko njih. Zabavi nema kraja uz stajanje i kretanje sa Dynamico hodalicom.

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU!

Dynamico je dizajniran za sigurne prve korake korisnika. Sigurnosne gaćice te zdjelični i prsni obroč pružaju korisniku maksimalnu podršku u hodu kako bi se mogao kretati bez straha od pada.

- Dostupno u dva modela:
 - » za unutrašnju uporabu - 5 veličina
 - » za vanjsku uporabu - 4 veličine
- Čelični okvir podesiv po visini
- Podesiva podstavljena potpora za prsa i zdjelicu
- Podesivo i perivo remenje koje pridržava korisnika u slučaju pada
- Širok raspon dodataka

DYNAMICO VELIČINE	VISINA KORISNIKA	VISINA DO KUKOVA	VISINA DO PAZUHA	NOSIVOST	ŠIRINA HODALICE
1	75-100 cm	44-60 cm	52-70 cm	55 kg	66 cm
2	95-130 cm	66-82 cm	77-95 cm	70 kg	66 cm
3	120-155 cm	77-102 cm	89-116 cm	85 kg	66 cm
4	140-175 cm	85-112 cm	92-126 cm	100 kg	71 cm
5	160-195 cm	97-125 cm	105-138 cm	115 kg	77 cm

CROCODILE

Hodalica




Crocodile spaja fenomenalan izgled, učinkovitu okretnost i napredne dodatke koji pomažu u potpunosti uživati u kretanju. Uz dodatke za zadržavanje pravog položaja, sigurnosne kočnice i sistem za prilagođavanje brzine kretanja dijete će se osjećati samopouzdanije i sigurnije u kretanju kao nikada do sada.

Sklopljena hodalica zauzima jako malo mjesta što ju čini idealnim suputnikom za bilo koju destinaciju.

- 3 veličine
- Širok izbor dodataka koji prilagođavaju hodalicu prema korisniku
- Sustav za prilagodbu brzine kretanja
- Multi podesive ručke
- Podesiva visina hodalice
- Sigurnosne kočnice

DYNAMICO VELIČINE	VISINA KORISNIKA	VISINA DO RUKOHVATA	NOSIVOST
0	do 105 cm	30-61 cm	30 kg
1	do 115 cm	42-71,5 cm	30 kg
2	do 150 cm	55-84 cm	45 kg
3	do 180 cm	75-104,5 cm	80 kg

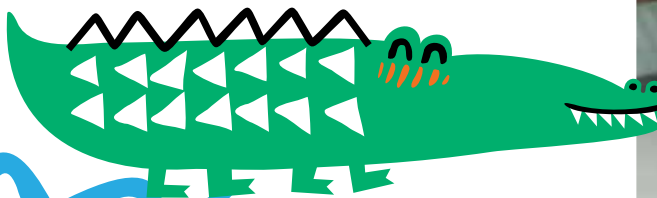

MUSTANG

Hodalica



- 4 veličine
- širok izbor dodatne oprema za prilagodbu i pozicioniranje
- podesiva visina hodalice
- blokada kotača
- sustav za usporavanje hodalice

Mustang je modularna hodalica za djecu i mlade, koji trebaju dodatnu podršku za samostalno kretanje u svakodnevnom životu. Mustang pruža odličnu obuhvatnu podršku zdjelici i trupu, a pomoću dodatka osigurava i ispravan položaj nogu i ruku prilikom kretanja. Ovisno o potrebama djeteta Mustang je moguće koristiti kao anteriornu ili posteriornu hodalicu. Također, Mustang je podesiv po visini tako da može pratiti djetetov rast kroz dulji period.

	VEL. 1	VEL. 2	VEL. 3	VEL. 4
VISINA POTPORE ZA TRUP	40-65 cm	60-85 cm	70-105 cm	87-130 cm

Mustang hodalicu moguće je podesiti da dijete drži u uspravnom položaju, lagano nagnuto prema naprijed kako bi se dodatno stimulirala aktivnost hodanja te potaknulo dijete na više aktivnosti kroz dan.





MARCY

Hodalica za djecu



Marcy je anteriorna hodalica koja podupire ravnotežu i potiče razvoj mišićne strukture trupa te pruža asistenciju djeci u prvim samostalnim koracima. Marcy dolazi sa bazom koja se može prilagoditi potrebama korisnika prema duljini, kraća baza korisniku pruža veću okretnost dok dulja pruža veću sigurnost i potporu.

Marcy se može i individualno prilagoditi potrebama korisnika sa širokim izborom dodatne opreme, pa je tako moguće dodati oslonce za ruke, sjedište, kočnice ili košaru kako bi vaša hodalica bila što bliža vašim potrebama.

- 4 veličine
- dvije boje za svaku veličinu

	VEL. 0	VEL. 1	VEL. 2	VEL. 3
VISINA RUČKI	30-47 cm	38-59 cm	53-75 cm	63-88 cm



BIRILLO

Hodalica za djecu



	BIRILLO 1	BIRILLO 2	BIRILLO 3	BIRILLO 4
ŠIRINA SJEDIŠTA	22 cm	26 cm	30 cm	38 cm
DUBINA SJEDIŠTA	18 cm	20 cm	23 cm	30 cm
VISINA NASLONA	18 cm	19 cm	21 cm	26 cm
DULJINA OSLOMCA ZA STOPALA	20-28 cm	23-31 cm	23-35 cm	22-40 cm

Prvi koraci su najteži a često je želja puno veća od mogućnosti. Birillo daje novu dimenziju kretanju čak i kada nisu ispunjeni svi preduvjeti za njega.

Podesivo sjedište i prilagodljiva visina omogućuju kretanje korisnicima koji još nemaju mogućnost uspravljanja.

- Trokutasto sjedalo omogućuje djeci slobodne pokrete ruku i trupa
- Čelični okvir podesiv po visini
- Abdukcijski klin
- Prednja zaštita podesiva po visini i dubini
- Dodatci: prozirni stolić i naslon za glavu
- 4 veličine



KRABAT PILOT

Pomagalo za puzanje

Krabat Pilot je inovativna i jedinstvena vrsta pomagala za puzanje koje podupire dijete u četveronožnom položaju prenoseći teret tijela na kukove i ramena. Proizvod ima prilagodljivu plinsku oprugu koja djetetu pruža dinamičnu pomoć pri podizanju zdjelice. Količinu asistencije koju pruža plinska opruga moguće je individualno prilagoditi potrebama djeteta.

Visina i duljina pomagala mogu se mijenjati, što Krabat Pilot čini prikladnim za djecu u dobi između 1-5 godina.

	KRABAT PILOT
ŠIRINA POTPORE	30 cm
DUBINA POTPORE	21-28 cm
VISINA POTPORE	15-21 cm



KRABAT PIRAT

Pomagalo za plivanje



Korištenje Pirata pruža više slobode u interakciji s djetetom jer nije potrebno trošiti vrijeme i energiju na održavanje djeteta na vodi ili brigu o sigurnosti.

- Izuzetno stabilno plutajuće pomagalo prikladno je za djecu na svim razinama funkcioniranja i dolazi u dvije veličine.
- Veličina 1 pogodna je za djecu u dobi od 2 do 8 godina, a veličina 2 za djecu u dobi od 8 do 18 godina.



Krabat Pirat je plutajuće pomagalo koje djetetu daje nove mogućnosti da se osamostali u vodi. Dijete se smjesti u siguran i poticajan položaj na trbuhu što mu omogućuje da bude aktivno. Kut podstavljenе podloge može se podesiti od 0 stupnjeva, u kojemu dijete leži vodoravno, do 90 stupnjeva kada je dijete u uspravnom položaju. Proizvod pomaže djeci da ojačaju mišiće vrata i leđa, poboljša pokretljivost gornjih i donjih udova i poveća stabilnost trupa. Krabat Pirat razvijen je s idejom da djeci pruži osjećaj neovisnosti, radosti, napredovanja i savladavanja novih izazova.



TRICIKL BIKO

Terapijski tricikl



Svi se vrlo rado prisjećaju trenutka iz djetinjstva koje su proveli vozeći se biciklima.

Ovaj tricikl sjajan je način da takva sjećanja budu omogućena i osobama koje imaju poteškoća sa upravljanjem klasičnim biciklima.

Terapijski tricikli dizajnirani su s ciljem da se njihovi korisnici uključe u aktivnosti koje će povećati njihovu snagu, samopouzdanje i osjećaj slobode, a istovremeno će dobiti sve prednosti koje nam donosi boravak na svježem zraku.

Ako je pozicioniranje problematično, tricikli se isporučuju sa remenčićima za stopala, obuhvatnim naslonom za leđa, potporama za podlaktice i prilagođenim pedalama.

Terapijske prednosti vožnje tricikla:

- Jačanje donjih ekstremiteta
- Vježbe recipročnog donjih ekstremiteta
- Vježbe ravnoteže
- Korištenje vizualne i prostorne percepcije za upravljanje
- Socijalna interakcija s vršnjacima i osobama iz okoline



- > 5 veličina
- > 2 modela
 - fixed pinion - omogućava pedaliranje unazad
 - free wheel - omogućava pedaliranje samo prema naprijed
- > 4 boje okvira: crvena, bijela, plava i roza
- > Sklopivi okvir
- > Dodatna oprema:
 - Naslon za leđa s pojasom
 - Remenčići za ruke i stopala
 - Abdukcijsko sjedište
 - Disk kočnice
 - Diferencijal na veličini 3, 4 i 5 za lakše okretanje na manjoj površini, zadnji kotači se okreću neovisno jedan o drugome






UPSEE

Pojas za kretanje

	XS	S	M	L
DOB	1-2 god.	2-4 god.	4-6 god.	6-8 god.

Upsee je pojas namijenjen kretanju uz pomoć za dijete s motoričkim teškoćama. Djeca sa teškoćama u razvoju po prvi puta iskuse kretanje u uspravnom položaju, koje do sad nisu imali prilike probati - neki su uspjeli ustati i prvi puta zagrliti brata ili sestru, neki su mahali susjedima tokom prve šetnje svojom ulicom, dok su neki po prvi puta prešli igralište držeći za ruku svog najboljeg prijatelja.

Namijenjen je djeci starosti od 1 do 8 godina maksimalne težine 25 kg.

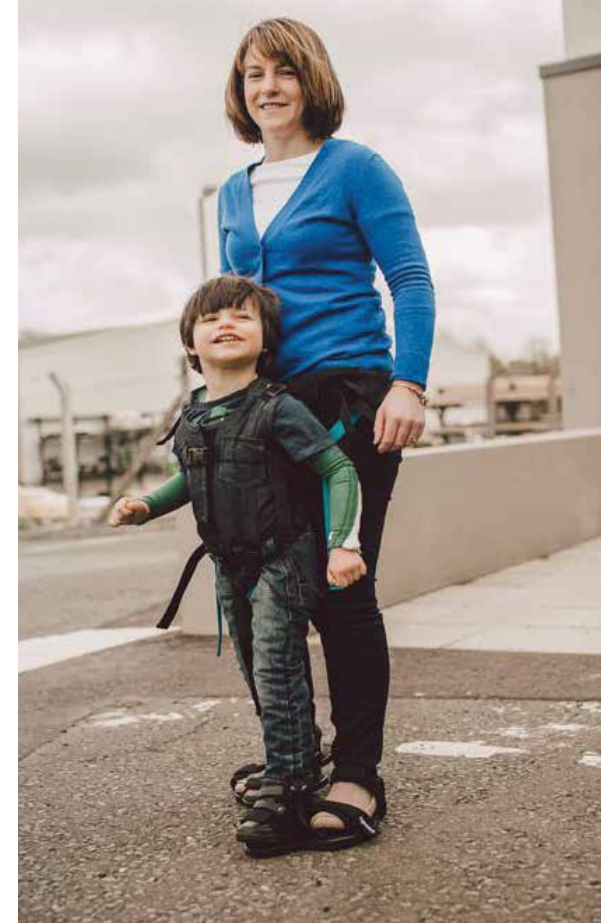

FRAME RUNNER

Hodalica



Frame Runner je pomagalo za djecu i odrasle koje potpomaže prilikom brzog hoda ili trčanja pružajući potporu i stabilnost.

Sastoji se od laganog okvira s tri kotača. Korisnik se kreće odgurivanjem nogama o podlogu i upravlja rukama pomoću upravljača. Frame Runner povećava mišićnu snagu i izdržljivost.



- Frame Runner se može namjestiti u tri pozicije.
- Frame Runner može biti od ravne pozicije kralježnice do horizontalne.


Po potrebi se mogu naručiti kočnice, svijetla i kotači 24", 26" ili 28".

Frame Runner dolazi u dvije veličine:

- M veličina je za visinu 120 do 150 cm i max 70 kg.
- L veličina je za visinu 150 do 190 cm i max 100 kg.



Stajalice

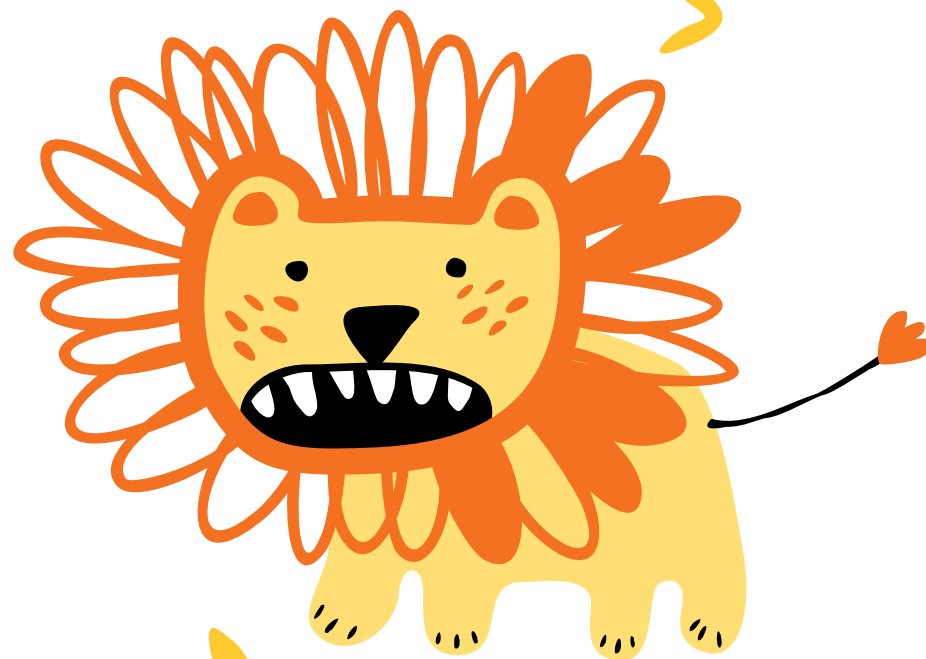





APP

Multisenzorna stajalica

- Čelični okvir
- Odvojiv stolić podesiv po visini i dubini
- Podesive potpore za koljeno
- Podesivi oslonci za stopala
- Podesiva ergonomska potpora za zdjelicu i prsa
- 3 veličine

App multisenzorna stajalica je revolucionaran proizvod koji pruža stajanje jednu sasvim novu dimenziju. Zahvaljujući brojnim zvučnim, vizualnim i perceptivnim podražajima ova stajalica je jedinstven proizvod u svijetu. Smanjuje odbojnost prema pomagalu, motivira korisnika na stajanje, stimulira neurovegetativni, senzorički i neuromotorni sustav i pretvara pasivno stajanje u aktivnu radnju.

Elektronski uređaj smješten u podnicu stajalice pretvara audio signale perifernih uređaja u vibraciju koju šalje po cijeloj stajalici. Korisnik vibracije osjeti na svakom mjestu na kojemu ima kontakt sa stajalicom.



MEERKAT

Stajalica

Meerkat je jednostavna modularna stajalica sa podesivim potporama za stopala, koljena, zdjelicu i trup. Sve komponente mogu se brzo i jednostavno prilagoditi potrebama korisnika ili prema potrebi i u potpunosti ukloniti. Korisnika je u stajalici moguće pozicionirati posteriorno ili anteriorno.

Jednostavna prilagodba stajalice prema djetetu omogućuje i roditeljima i terapeutima lako korištenje.

DINAMIČNO STAJANJE

Dodatak za ljuľanje omogućuje stajalici da mijenja centar težišta što zahtijeva veću mišićnu aktivnost djeteta da bi održalo ravnotežu. Na ovaj način potiče se vježbanje i aktivacija mišića te se pasivno stajanje prebacuje u aktivan proces.

	VEL. 1	VEL. 2	VEL. 3
VISINA KORISNIKA	60-80 cm	80-130 cm	130-180 cm

- Anteriorni i posteriorni položaj pozicioniranja
- 3 veličine
- 3 boje
- Velik broj dodataka za optimalan položaj stajanja
- Težina korisnika do 90 kg
- Visina korisnika od 70 - 180 cm



TOUCAN


Stajalica



Dizajniran blagim linijama u kombinaciji sa živahnim bojama, Toucan je moderna stajalica čiji dizajn nadmašuje jedino njezina funkcionalnost. Ova modularna stajalica prilagođava se potrebama korisnika, pruža mu optimalnu potporu te rasterećuje stajanje odabirom nagiba stajalice. Razvijena kako bi djeci omogućila interakciju s prijateljima i okolinom, za uporabu u kući, školi ili jaslicama. Širok izbor dodataka daje mogućnost prilagodbe stajalice prema potrebama korisnika.

Podešavanje nagiba stajanja omogućuje zauzimanje idealnog položaja korisnika.

- Okvir sa podesivim nagibom
- Odvojivi stolić podesiv po nagibu
- Podesive potpore za koljena
- Oslonac za stopala podesiv po visini
- Podesivi oslonci za pete
- Podesiva ergonomska potpora za zdjelicu i prsa
- 5 veličina u 3 različite boje
- Težina korisnika do 90 kg
- Visina korisnika od 60 - 180 cm

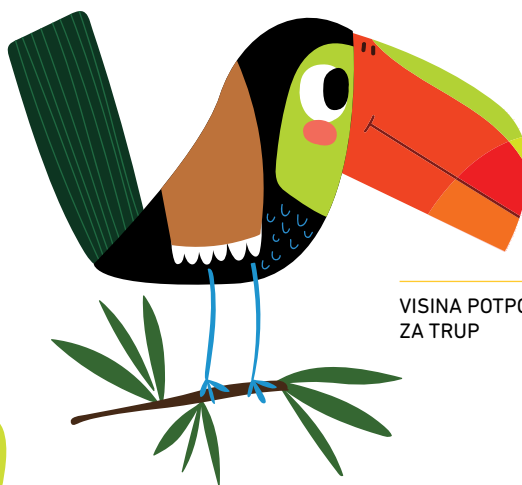

	VEL. 1	VEL. 2	VEL. 3	VEL. 4	VEL. 5
VISINA POTPORE ZA TRUP	34-70 cm	54-90 cm	74-110 cm	91-121 cm	111-141 cm



RABBIT


Stajalica

	VEL. 1	VEL. 2	VEL. 3	VEL. 4
VISINA POTPORE ZA TRUP	55-74 cm	75-108 cm	83-119 cm	96-142 cm


Model stajalice RABBIT je mnogo više od uobičajenih stajalica. Nastala je s idejom spajanja terapije stajanjem i želje za samostalnim funkcioniranjem korisnika u okolini. Aktivno korištenje stajalice pospješuje razvoj motoričkih funkcija korisnika te potpomaže dodatni razvoj mišića i zglobova.

Širok raspon dodatka omogućuje stajalici da se prilagodi korisniku i da mu osigura optimalnu podršku kako bi sva njegova pozornost bila usmjerena na aktivnosti u okolini.

- 4 veličine
- 3 boje okvira
- Nagib od 0° - 30°
- Težina korisnika do 70 kg
- Visina korisnika od 90 - 180 cm
- Brzo i jednostavno uklanjanje pogonskih kotača

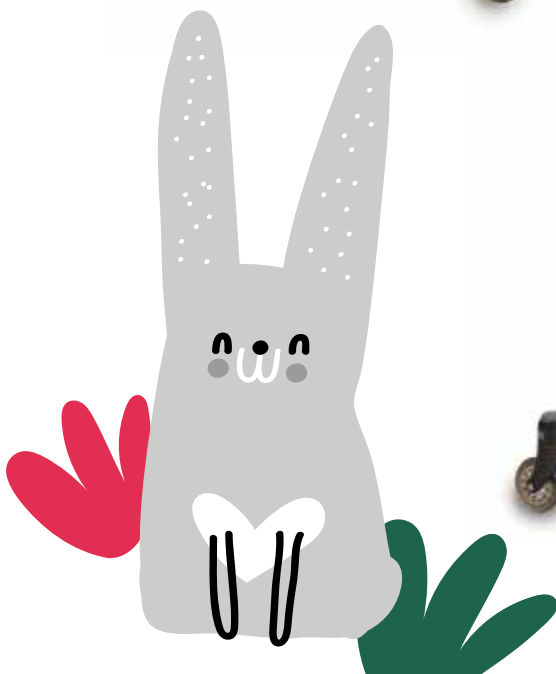

Sustavi za sjedjenje

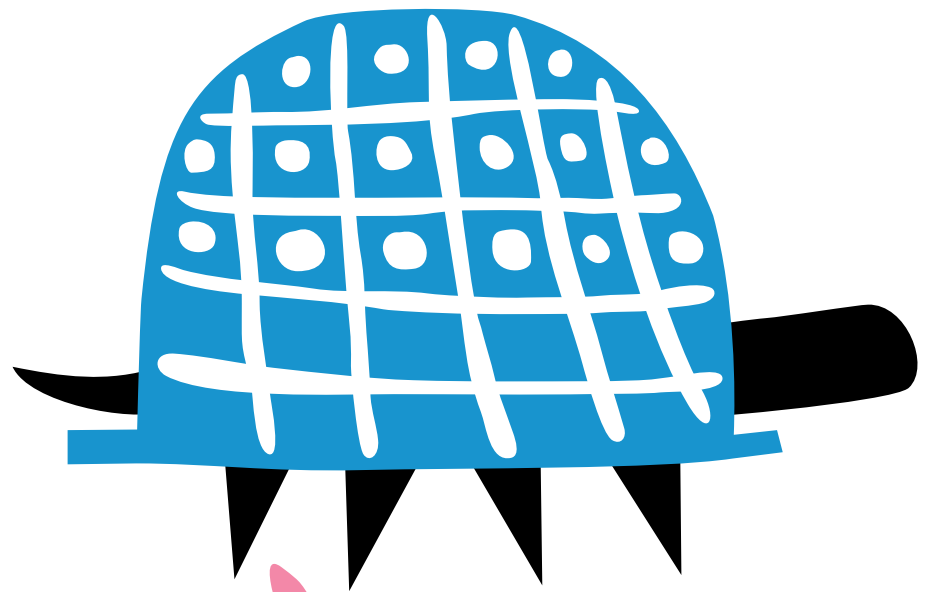





GOTO

Prijenosno posturalno
sjedište



GoTo sjedište je lagana, prijenosna posturalna potpora za dijete sa teškoćama u razvoju. GoTo olakšava svakodnevne obveze i aktivnosti koje vaše dijete više neće propuštati. To je maleni komadić samostalnosti koji omogućava djetetu da iskusi svijet oko sebe iz nove perspektive i osjeća se kao da je u središtu svakog događanja.

Namijenjen djeci od 1 do 8 godina maksimalne tjelesne težine 30kg. Postolje pruža 26 različitih reklinacijskih položaja, od uspravnog (106°) do ležećeg (140°). Naslon za glavu i potporno rasteretne pelote podesive po visini omogućavaju pravilno pozicioniranje djeteta u GoTo s obzirom na njegovu visinu.

Odaberite standardni, jednostavno konturirani, udoban naslon ili prilagođeni naslon koji nudi mnoge mogućnosti pojačane potpore glave vašem djetetu (Advanced).

Goto sjedište nježno grli vaše dijete i pruža mu podršku prilikom sjedenja u kolicima i izvan njih.





PLAYPAK

Terapijski set

Playpak je prijenosni terapijski set koji pomaže djeci u razvoju kroz igru. Koristi tri ključne posture u ranoj intervenciji kako bi se djetetu omogućila igra i učenje u terapiji kod kuće. Prikladan je za djecu kojoj je određena GMFCS razina I-V, a sve s obzirom na razinu njihovih tjelesnih sposobnosti. Sadrži valjke, klinove i potpore koje su dizajnirali klinički stručnjaci u suradnji s terapeutima.

Komponente se mogu slagati u mnogo kombinacija kako bi se facilitirale važne posturalne reakcije i položaji.

- Playpak torba
dužina 44cm, širina 49cm, dubina 15cm
- Playpak prostirka
dužina 134cm, širina 75cm
- Dugački valjak
dužina 52cm, širina 9cm, dubina 7cm
- Kratki valjak
dužina 28cm, širina 9cm, dubina 7cm
- Pojas za pozicioniranje
dužina 66cm, širina 8cm
- Velika potkova
dužina 44cm, širina 49cm, dubina 15cm
- Mala potkova
dužina 7cm, širina 9cm, dubina 20cm



SITTER

Prijenosno posturalno
sjedište



Naš Special tomatu Sitter pruža udobnu i pristupačnu alternativu drugim proizvodima s prilagodljivim sjedištima u kojemu dijete boravi tijekom dana. Posebno oblikovana potpora za glavu i bočne potpore dizajnirani su tako da pozicioniraju i podupiru dječju glavu, te da se trup drži u uspravnom položaju.

Napravljeni od materijala bez lateksa, Soft-Touch Sitter je otporan na pucanje i trganje, a nepropusan za tekućine. Sitter je izrađen od mekih i izdržljivih materijala, pogodnih za lako čišćenje i dezinfekciju.

Iako je vrlo lako primjenjiv na svim podlogama, Sitter svoju punu raskoš pokazuje u kombinaciji sa drvenom bazom na kojoj se može podesiti od uspravnog položaja do 25 stupnjeva nagiba. Na taj način može se postaviti u odgovarajući položaj za svako dijete. Također uključuje četiri okretna kotača, tako da se djeca mogu samostalno premještati iz sobe u sobu bez potrebe za promjenom položaja sjedenja.

- 5 veličina
- 3 boje
- Za djecu od 1 godine starosti pa do odrasle dobi
- 3 različite baze
- Mogućnost aplikacije sjedalice na bilo koji stolac



DYNAMICO VELIČINE	VISINA KORISNIKA	DOB	NOSIVOST	ŠIRINA SJEDIŠTA	DUBINA SJEDIŠTA	VISINA LEĐNOG NASLONA
1	76-89 cm	1-2 godine	do 18 kg	20 cm	18 cm	53 cm
2	89-122 cm	2-6 godine	do 27 kg	25,5 cm	24 cm	60 cm
3	101-142 cm	6-9 godina	do 36 kg	30,5 cm	29 cm	73,5 cm
4	127-165 cm	9-14 godina	do 50 kg	35 cm	34 cm	89 cm
5	137-188 cm	14 godina i odrasli	do 90 kg	40,5 cm	40,5 cm	99 cm

LINER

Prijenosno posturalno
sjedište



LINER VELIČINE	DIMENZIJE SJEDIŠTA	ŠIRINA LEĐNOG NASLONA	VISINA LEĐNOG NASLONA
1	20,5 x 20,5 cm	19 cm	25,5 cm
2	25,5 x 25,5 cm	21,5 cm	34,5 cm
3	30,5 x 30,5 cm	25,5 cm	37 cm
4	35 x 35 cm	33 cm	39,5 cm
5	40,5 x 40,5 cm	35,5 cm	40,5 cm

Jednostavno rješenje za potrebe sjedenja djeteta koje se može ponijeti kuda god krenuli? Proizvođač Special Tomato razvio je Soft-Touch® Liner™ kao potencijalno rješenje za vaše dijete. Novi Soft-Touch® Liner™ nudi pristupačnu alternativu drugim sustavima sjedenja s ciljem da eliminira potrebu za transportom teških sustava sjedenja.

Soft-Touch® Liner™ napravljen je od materijala mekog na dodir, lakog za održavanje, izrađenog bez lateksa. Sjedalo u kombinaciji sa naslonom za leđa promiče dobro držanje tijela za djecu s blagim do umjerenim potrebama za pozicioniranjem. Sjedište i naslon za leđa mogu se koristiti odvojeno ili zajedno. Soft-Touch® Liner™ može se postaviti na većinu sjedalica, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće: kolica, visoke stolice, stolice za blagovaonice, restoranske stolice i stolice u učionici.

Sjedište i naslon Soft-Touch® Liner™ mogu se pričvrstiti zajedno za pohranu, pomoću traka za pričvršćivanje. Može se držati u prtljažniku automobila, tako da je uvijek pri ruci!

- 5 veličina
- 3 boje
- Širina sjedišta od 20 - 40 cm
- Širina naslona od 19 - 36 cm
- Mogućnost aplikacije sjedalice na bilo koji stolac

RADNI STOLIĆ

Multifunkcionalni terapijski stol dizajniran je kako bi omogućio idealne uvjete za rad ili vježbanje. Dostupan je u 3 veličine od kojih je svaka podesiva po visini i nagibu kako bi se prilagodio potrebama djeteta. Stolić je kompatibilan za korištenje sa pomagalima kao što su terapijski ili obični stolci.

Njegova ergonomska i funkcionalna struktura pruža korisniku široku radnu površinu, dizajniranu kako bi stimulirala i potaknula stabilizaciju trupa, funkcionalno korištenje gornjih ekstremiteta i dobar pregled okoline.

	SMALL	MEDIUM	LARGE
VISINA RADNE POVRŠINE	44-57 cm	53-77 cm	68-108 cm



GRILLO CHAIR

Ergonomska stolica za djecu s teškoćama u razvoju



Zahvaljujući preciznom ergonomskom dizajnu, ova stolica omogućuje korisniku uživanje u optimalnom držanju, potičući uključivanje i sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u vrtiću ili školi.

Sustav podešavanja visine s plinskom polugom čini Grillo Chair zgodnom i izuzetno prilagodljivom stolicom; može se kombinirati s bilo kojom površinom namijenjenom za didaktičke i razigrane aktivnosti, kao što je multifunkcionalni radni stol od Ormese.

Grillo Chair je idealan za djecu s posebnim potrebama jer im omogućuje društvene interakcije kao i koordinaciju "oko-ruka".

Grillo Chair pruža maksimalnu prozračnost i prirodnu toplinsku izolaciju, smanjuje znojenje. Presvlaka je periva i dostupna u plavoj i ružičastoj boji.

➤ Dostupna u 2 veličine

Small:

Visina korisnika	90-120 cm
Težina korisnika	do 35 kg

Medium:

Visina korisnika	110-145 cm
Težina korisnika	do 45 kg

Autosjedalice





IPAI MAX

Autosjedalica za djecu
s teškoćama u razvoju



IPAI MAX je autosjedalica posebno prilagođena za djecu koja nemaju kontrolu trupa i koja se ne mogu pravilno pozicionirati u standardnim autosjedalicama.

Ova autosjedalica je opremljena dodatcima poput pelota za trup, abdukcijskog klina, podesivog nagiba naslona koji pružaju podršku korisniku i omogućuju lakše zadržavanje ispravnog položaja.

Dizajnirana na način da se može postaviti u gotovo svaki automobil, IPAI MAX će vam omogućiti bezbrižnu vožnju i uživanje u vožnji.

Popularan dodatak autosjedalici je i okretna ploča koja transfer u autosjedalicu i iz nje čini lakšim i jednostavnijim. Ova značajka dolazi do izražaja kako dijete raste i dobiva na težini.

- Podesiva visina oslonca za glavu
- Podesiv nagib naslona 80°-120°
- Podesiv nagib autosjedalice
- Isofix adapter
- Pelote za trup
- Oslonac za stopala podesiv po visini
- Okretna ploča

Širina sjedišta	26-32 cm
Dubina sjedišta	30-42 cm
Visina naslona	56-76 cm
Visina pelota za trup	24-36 cm
Visina djeteta	100-150 cm



KIDSFLEX

**Autosjedalica za djecu
s teškoćama u razvoju**

Fleksibilna, udobna i sigurna, KIDSFLEX je autosjedalica posebno dizajnirana za djecu sa poteškoćama kontrole trupa u vertikalnom položaju. Podesiva po visini i dubini sjedišta, ova autosjedalica napravljena je kako bi bila suputnik kroz dulji period. Autosjedalica je opremljena dodatcima poput pelota za trup, abdukcijskog klina, prsne pelote, pojasa i podesivog nagiba naslona koji pružaju podršku korisniku i omogućuju lakše zadržavanje ispravnog položaja. Popularan dodatak autosjedalici je i okretna ploča koja transfer u autosjedalicu i iz nje čini lakšim i jednostavnijim, gotovo neizostavan dodatak ako se radi o većoj djeci.


Posebnost ove autosjedalice je njezina veličina. Naime, Kidsflex XL pruža potporu korisnicima do težine od čak 75 kg.

- Podesiva visina oslonca za glavu
- Podesiv nagib naslona
- Podesiv nagib autosjedalice
- Isofix adapter
- Pelote za trup
- Abdukcijski klin
- Oslonac za stopala podesiv po visini
- Okretna ploča

Širina sjedišta	31-40 cm
Dubina sjedišta	28-46 cm
Visina naslona	67-82 cm
Visina pelota za trup	16-37 cm
Težina djeteta max	75 kg




Pomagala za kupaonicu

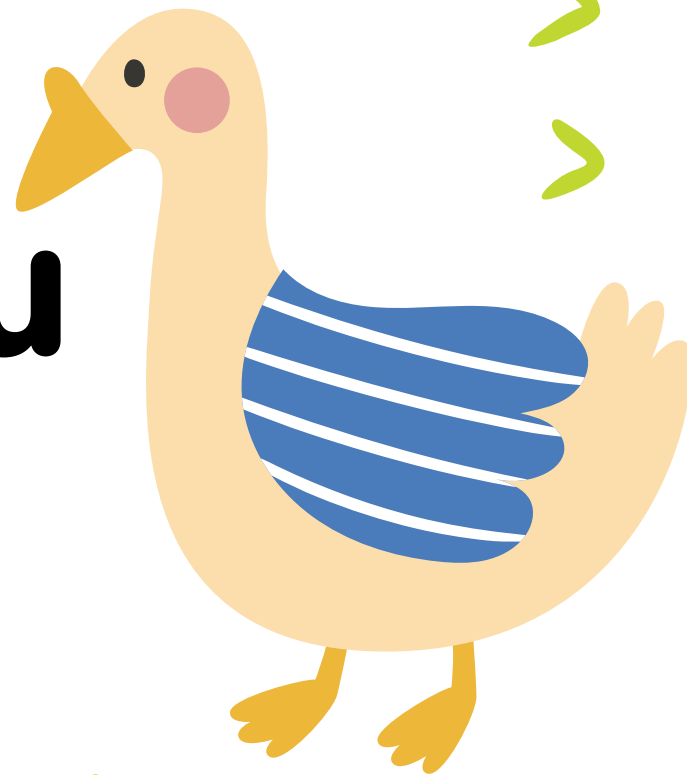



SPLASHY

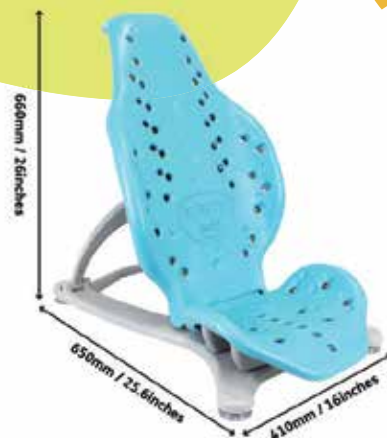

Splashy je multifunkcionalna sjedalica za kadu koja olakšava kupanja i omogućuje mnogo trenutaka zabave za djecu s teškoćama i njihove obitelji. Kompaktna je i može se postaviti na niže pozicije u kadi, zahtjeva malo prostora, a lagana je, odvojiva i jednostavna za čišćenje – ispere se tušem i spremna je za iduće korištenje. Namijenjena je djeci od 1 do 8 godina starosti, maksimalne tjelesne težine 30kg.

Materijal je topao na dodir, brzo se suši što ga čini pogodnim za bilo koju okolinu u kojoj ima vode. Postolje ima 26 pozicija za reklinaciju, od uspravnog (106°) do ležećeg (140°) položaja.

- Maksimalna nosivost – 30 kg
- Dob djeteta : 1 - 8 god.

Visina leđnog naslona	61 cm
Širina leđnog naslona	38,5 cm
Dubina sjedišta	30 cm
Širina sjedišta	35 cm
Širina postolja	42 cm
Visina postolja	63 cm



SPLASHY BIG



Splashy Big je multifunkcionalno, prijenosno sjedište za kadu za djecu i tinejdžere s teškoćama u razvoju koji žele sudjelovati u aktivnostima zajedno sa svojim prijateljima i obitelji.

Kako vaše dijete raste, Splashy Big može mu pomoći u sticanju samostalnosti i neovisnosti u osobnoj higijeni. Kupanje u odnosu na tuširanje facilitira samostalniji pristup njezi jer omogućava djetetu kontroliranje okoline i iskustava što pomaže u stjecanju samopouzdanja.

Splashy Big može se koristiti u tuš kabini, oko kuće ili u prirodi kako bi se vaše dijete upoznao s novim iskustvima i okolinama.

- Maksimalna nosivost – 55 kg
- Dob djeteta: 8 -16 god.

Visina leđnog naslona	72 cm
Širina leđnog naslona	45 cm
Dubina sjedišta	40 cm
Širina sjedišta	45 cm
Širina postolja	42 cm
Visina postolja	79,5 cm





OTTER


Stolac za kadu ili tuš

Otter je moguće koristiti samostalno ili kombinirati sa dvije baze, baza za tuš ili baza za kadu, koje dodatno olakšavaju korištenje sjedalice prilikom kupanja.

VELIČINA MODELA	SMALL	MEDIUM	LARGE
MAX TEŽINA KORISNIKA	27 kg	55 kg	72,5 kg
DUBINA SJEDIŠTA	33 cm	33 cm	42 cm
VISINA NASLONA	45 cm	63,5 cm	81 cm
VISINA SJEDIŠTA	5-17,5 cm	5-17,5 cm	5-17,5 cm
UKUPNA DULJINA POMAGALA	92,7 cm	106,5 cm	127 cm
UKUPNA ŠIRINA POMAGALA	43,2 cm	43,2 cm	43,2 cm
VISINA KORISNIKA	91,5 kg	81 – 127 cm	117 – 173 cm
TEŽINA PROIZVODA	5 kg	5,5 kg	6,35 kg
DIMENZIJE TUŠ STALKA (ŠXDXV)	43 X 81 X 12,7-25,4 cm		
DIMENZIJE STALKA ZA KADU (ŠXDXV)	69 X 84 X 53 cm		

Dječja stolica za kupanje Otter pruža podršku i sigurnost djeci tijekom kupanja. Otter ima sjedalo i naslon podesivog kuta kako bi se prilagodio potrebama svakog pojedinca. Noge su otporne na klizanje radi sigurnosti i mogu podići stolicu za dodatnih 15 cm.

Stolica ima bočne potpore podesive po visini i širini koje se mogu koristiti za pozicioniranje glave ili trupa.

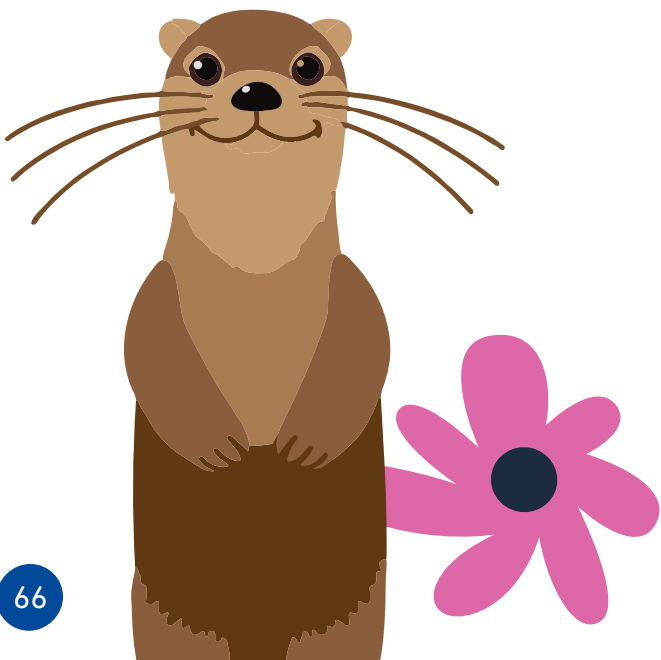



GOTTAGO

Toaletna stolica




GottaGo je lagana, prijenosna toaletna stolica s kojom je olakšano navikavanje djeteta s teškoćama na obavljanje nužde u toaletnu stolicu. Sjedištem se dijete prilagođava u položaj potpomognutog čučnja za lakše obavljanje nužde.

Namijenjen djeci od 2 do 9 godina maksimalne tjelesne težine 30kg. Stolicu je moguće namjestiti u tri visine – visina toaletne posude za djecu, standardna visina toaleta, visina toaleta za osobe s invaliditetom. Perive navlake, tople na dodir osiguravaju udobnost korištenja.

Cijelu je stolicu moguće spakirati u ruksak, a i jednostavna je za postavljanje čime se eliminiraju stresni odlasci na toalet prilikom obiteljskih putovanja. GottaGo omogućava obitelji dosljednost u uspješnom obavljanju nužde.



Ortopedska obuća za djecu

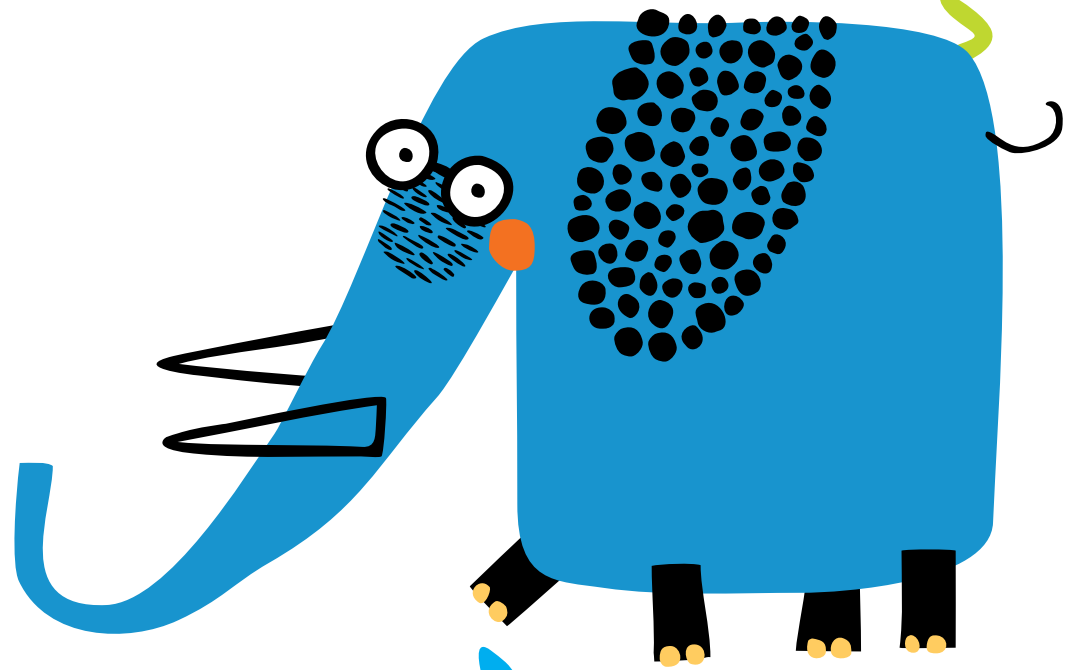

Izrađena je od kvalitetne kože i gotovih đonova u bijeloj i crnoj boji. Izrađujemo i individualne đonove s obzirom na vrste deformiteta.

Svaki model je ručno i individualno po mjerama izrađen.

Svi modeli imaju anatomske i individualno izrađene uložake.

Svi modeli su dizajnirani uz stručno savjetovanje sa ortopedima.



U katalogu su svi modeli prikazani u kombinacijama sa crnom napom, ali sve modele je moguće naručiti još u:

napama



velurima



No.041

Gornjište je izrađeno od crne i ljubičaste nape.


Model ima standardni đon i izrađuje se u veličinama od 22-40.



No.043

Gornjište je izrađeno od crne nape.

Model ima standardni đon i
izrađuje se u veličinama od 22-39.

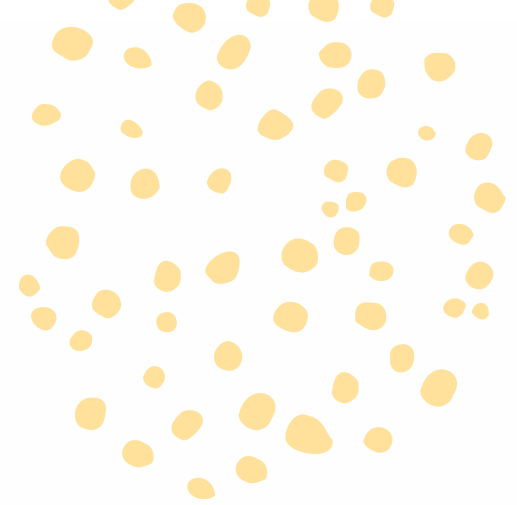

No.046

Gornjište je izrađeno od crnog velura i srebrne kože.

Model ima standardni đon i izrađuje se u veličinama od 22-39.



No.047

Gornjište je izrađeno od crne nape.

Model ima standardni đon i izrađuje se u veličinama od 22-39.



Lavandon Karla, roze

Anatomske i ortopedske tenisice za djecu školske dobi.
Cijele su izrađene od kože, ručno proizvedene u Hrvatskoj.

Model izrađuje se u veličinama od 31-37.




Lavandon Pčelica

Papučice su u cijelosti kožne i imaju petnu šalicu i povišen medijalni svod na ulošku koji je presvučen kožom.

Model je namijenjen za hodače jer ima anatomski uložak s petnom šalicom i uzdignutim svodom.

Model izrađuje se u veličinama od 19-30.

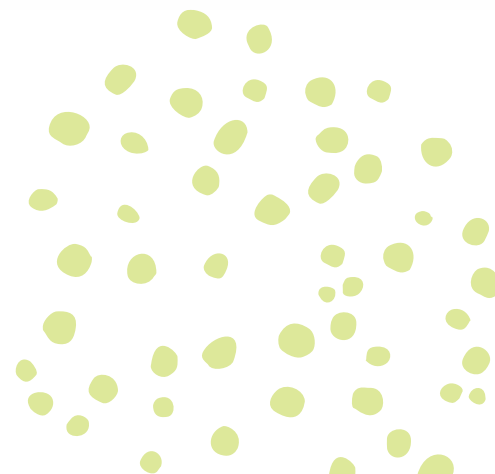


Star

Anatomske i ortopedske tenisice.

Mogu se naručiti po veličinama ili po mjerama i individualnim zahtjevima stopala.

Model izrađuje se u veličinama od 36-42.

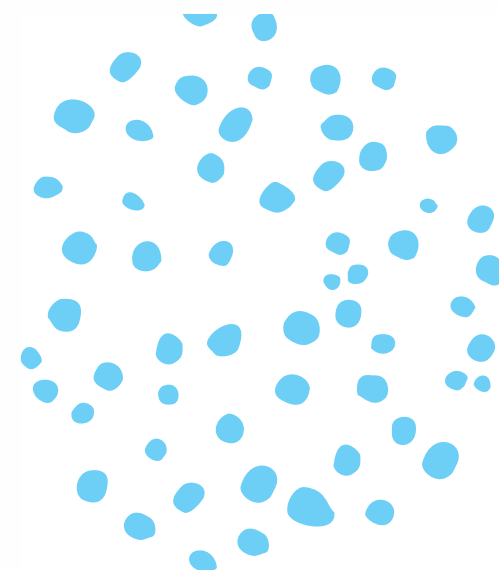



Pelene za djecu i podmetači

Pelene za zaštitu djece starije od 3 godine koja
imaju tegobe s inkontinencijom



SENI Kids Junior Extra 15+kg



SENI Kids Junior 11-22kg



Seni Soft Normal

SENI Kids Junior Super 20+kg

Zaštitni podmetači za krevet

- mekana površina iz netkanog materijala
- izuzetno udobno ležanje
- vanjski sloj iz vodonepropusne protuklizne folije
- odlična dodatna zaštita kreveta
- idealno rješenje prilikom zamjene pelena pranja pacijenta ili zamjene obloga za rane
- primjenjivo i kao podložak za invalidska kolica

- idealne za djecu koja imaju tegobe s inkontinencijom, a još su presitna da bi mogla nositi proizvode namijenjene odraslima
- EDS (specijalni distribucijski sloj) - omogućuje bržu i djelotvorniju distribuciju tekućine unutar apsorpcijske jezgre
- dermatološki testirano
- prozračan materijal koji omogućuje koži da diše
- odour stop - sprječava pojavu neugodnih mirisa
- dvostruki sustav učvršćivanja za još veću slobodu pokreta i savršenu sigurnost
- šira elastična traka u stražnjem dijelu pelene
- elastične čičak-trake koje omogućuju višekratno odljepljivanje i učvršćivanje pelene
- anatomske oblikovane jezgre za još veću udobnost nošenja
- postranične zaštitne manžete koje sprječavaju istjecanje mokraće - veća sigurnost
- indikator vlažnosti - informacija o potrebi zamjene proizvoda
- latex free



**BAUERFEIND d.o.o.
UPRAVA**

Goleška 20,
10020 Zagreb
T 01 654 28 55
info@bauerfeind.hr

Zagreb
Božidarevićeva 13
T 01 244 41 60

Zagreb
Draškovićeva 56
T 01 481 49 19

Zagreb
Ilica 167a
T 01 35 35 171

Čakovec
Svetojelska cesta 7
T 040 823 026

Dubrovnik
Ulica dr. Ante Šercera 1b
T 020 77 02 21

Karlovac
Trg hrvatskih branitelja 4
T 047 432 344

Koprivnica
Željka Selinger 2a
T 048 210 140

Osijek
Vukovarska 12
T 031 372 474

Pula
Ulica Maršovog polja 10
T 052 544 393

Rijeka
Verdijeva 5b
T 051 312 213

Slavonski Brod
Ulica Vladimira Nazora 1
T 035 407 350

Split
Spinčičeva 2b
T 021 770 462

Varaždin
Trg kralja Petra Svačića 1a
T 042 313 989

Vinkovci
Ante Starčevića 51
T 032 308 411

Virovitica
Stjepana Radića 28
T 033 353 599

Zadar
Kolovare 9
T 023 254 500