







# ISTRAŽIVANJE LIJEČI

**Eurofarm Spa**

Zona Industriale Piano Tavola 95032, Belpasso (CT) - Italy

---

vendite.farmacia@eurofarm-spa.com  
servizio.clienti@eurofarm-spa.com

---

Telefono: +39 095391346

[www.eurofarm-spa.com](http://www.eurofarm-spa.com)





## Proizvodi se u Italiji od 1979.

Eurofarm Spa je vodeća proizvodna tvrtka u medicinskom sektoru specijalizirana za istraživanje, proizvodnju i distribuciju širokog asortimana flastera, sterilnih kirurških obloga, zavoja i napredne linije medicinskih proizvoda za liječenje rana i kožnih ozljeda.

Tvrtka je stalno posvećena istraživanju novih proizvoda i razvoju sve učinkovitijih proizvodnih procesa zahvaljujući timu stručnjaka koje ima na raspolaganju.



## Tvrtka

Tvrtka se prostire na površini od 32.000 m<sup>2</sup> od čega je 13.000 m<sup>2</sup> pokriveno uredima, skladištima i prostorima s kontroliranim mikroklimatskim uvjetima.

Moderna, bijela hala, površine oko 800 m<sup>2</sup>, dvije linije za premazivanje, laboratorij za kontrolu kvalitete s naprednom tehnologijom te sofisticirani pogon za sterilizaciju etilen oksidom, osiguravaju potpunu integraciju proizvodnog ciklusa, od sirovine do sterilnog proizvoda.

### TVRTKA JE CERTIFICIRANA PREMA NORMAMA:

UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 13485



### EUROFARM U SVIJETU

ARGENTINA  
 AUSTRALIJA  
 AUSTRIJA  
 BANGLADEŠ  
 BELGIJA  
 BOSNA - HERCEGOVINA  
 BUGARSKA  
 ČILE  
 CIPAR  
 HRVATSKA  
 ARAPSKI EMIRATI  
 NJEMAČKA  
 JAPAN  
 GRČKA  
 INDIJA  
 IRSKA  
 KAZAHSTAN  
 KENIJA  
 KOREJA  
 MALTA  
 NOVI ZELAND  
 POLJSKA  
 PORTUGAL  
 UJEDINJENO KRALJEVSTVO  
 ČEŠKA  
 RUMUNIJA  
 SRBIJA  
 SLOVENIJA  
 ŠPANJOLSKA  
 JUŽNA AFRIKA  
 SAD  
 VENEZUELA  
 VIJETNAM

## Preko 40 godina jedna od rijetkih proizvodnih konstanti ovog sektora u Italiji.

Iskustvo, dosljedna stručnost /know-how/, pažnja usmjerena potrebama pacijenta i klijenta, izrazi su jedne strukturirane i efikasne metode, koja dan za danom rezultira konkretnim rezultatima, te kojoj je cilj razvoj poduzeća i ekspanzija prema međunarodnim tržištima.





**SPREJ ZA ČIŠĆENJE RANE**

str. 6

Vulnomed



**FLASTERI**

str. 8


Euromed  
Euromed Aloe  
Euroderm plus  
Eurometal  
Eurodressing



**FLASTERI**

str. 16

Eurostrips Aloe	Eurosilk
Eurostrips emo-stop	Eurotrasp
Eurostrips	Eurofix
Eurostrips Water Barrier emo-stop	Enterafix
Euroreel	Euroderm roll
Europor	

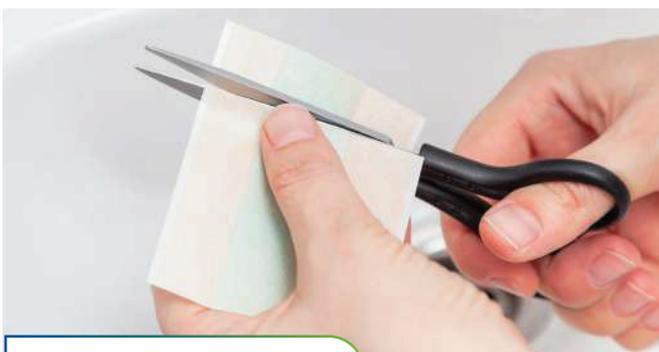

**FLASTERI ZA REZANJE**

str. 14

Longfix Aloe  
Longfix



**KOMPRESI ZA OKO**

str. 26

Europtical occlusivo  
Europtical non occlusivo

# KATALOG PROIZVODA

## LINIJA PROIZVODA



### TRAKE ZA ZATVARANJE RANA

pag. 28

Eurosuture



### ENDOTRAHEALNI PODLOŠCI

pag. 30

Tracheopad



### NAPREDNE OBLOGE

str. 32

Euronet paraffin	Eurocell hydro extra
Hydromed	Euroderm foam
Hydromed gel	Euroderm foam plus
Euroderm	Euroderm foam heel
Euroderm iodine	Euroderm foam tracheo
Euroderm plus iodine	Euroderm foam plus concave
Silvermed	Euroderm foam plus sacral
Silvermed sb	Euroderm foam silicone
Eurosorb	Euroderm foam plus silicone
Eurocell hydro	



### SPORTSKA LINIJA

str. 52

Euroathletic KLS  
Euroathletic sport tape  
Eurosave



### ZAVOJI

str. 56

Eurelasto L	Eurozinc bielast
Eurelasto F	Flebimed short
Eurelasto	Flebimed media
Eurozinc	Flebimed forte
Eurozinc elast	Flebimed bielast
Eurozinc alginate	

## SPREJ ZA ČIŠČENJE RANA





- SA ALOE VEROM
- POTIČE ZACIJELJIVANJE
- DERMATOLOŠKI TESTIRANO
- JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

Prije svake primjene lijeka...

## VULNOMED

Rješenje u spreju sa srebrom i Aloe Verom



Sprej za čišćenje koji se primjenjuje na rane, ulkuse, opekline, eriteme, stome, fistule, porezotine, opekline meduza i ubodi insekata. Može se koristiti za intimnu higijenu. Vulnomed je sterilna izotonična fiziološka otopina na bazi srebra i aloe vere, namijenjena za čišćenje, ispiranje i hidrataciju kože. Ne peče, ne zahtijeva ispiranje i kompatibilna je s elastičnim zavojima. Srebro sprječava mikrobnu kontaminaciju zavoja i održava ranu slobodnom od egzogenih bakterija. Aloe vera je poznata po svojim svojstvima zacjeljivanja, obnavljanja epitela i antiseptičkim svojstvima.

### Namjena:

Vulnomed je medicinski sprej koji, zahvaljujući decilglukozidu, ekstraktu aloe vere i srebru, predstavlja cjelovito rješenje i kompatibilan je za korištenje sa svim oblogama, kako na netaknutoj koži, tako i na sluznicama te oštećenoj i inficiranoj koži.

- **Intimna njega:** kod promjena pH rodnice i vulvovaginitis
- **Antiseptik:** smanjuje bakterijsko opterećenje u zaraženim ranama i venskim
- **Umiruje:** umirujuće djelovanje za pelenski osip, crvenilo i iritacije
- **Obnavlja:** obnavljanje kože kod rana, eritema, opekline, ogrebotina i žuljeva

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pakiranje	Barkod
501815	125 ml	1 kom	12	 A925008334



ČIŠĆENJE LEZIJA  
NA KOŽI



ABRAZIJE  
I OPEKLINE



IRITACIJE  
KOŽE



OPEKLINE MEDUZA  
I UBODI INSEKATA



# FLASTERI





- TRANSPARENTAN
- PRILAGODLJIV
- VISOKOUPIJAJUĆI
- MEKANI NETKANI MATERIJAL
- BEZBOLNO SKIDANJE
- NE SADRŽI LATEKS



## EUROMED

### Sterilni hipoalergijski ljepljivi flaster za jednokratnu upotrebu od netkanog materijala

Sterilni hipoalergijski a traumatski postoperativni flaster od prilagodljivog netkanog materijala koji omogućuje iznimnu prozračnost. Sadrži središnji neljepljivi jastučić visoke sposobnosti upijanja.

#### Namjena:

- Prikladno za postoperativne rane i prvu pomoć.
- U liječenju ozljeda, kao što su posjekotine i ogrebotine.
- Kao sekundarni flaster preko gelova, masti i drugih primarnih obloga

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
891800	5x7 cm	5 kom	48	 A923327694
891801	6x9 cm	6 kom	48	 A923381610
891802	10x8 cm	6 kom	48	 A923381608
891804	15x8 cm	6 kom	48	 A923381634
891805	20x10 cm	4 kom	48	 A925605875
717807	10x25 cm	50 kom	2	 A927263018
717808	10x30 cm	50 kom	2	 A927263020





- SA ALOE VEROM
- POTIČE CIJELJENJE RANE
- ANTISEPTIK
- MEKANI NETKANI MATERIJAL
- BEZBOLNO SKIDANJE
- NE SADRŽI LATEKS



## EUROMED ALOE

### Sterilni hipoalergijski ljepljivi flaster sa središnjim jastučićem od Aloe Vere

Sterilni ljepljivi flaster, hipoalergijski, koji ne uzrokuje ozljedu tkiva, sa središnjim jastučićem koji sadrži aloe veru. **Aloe vera djeluje zacjeljujuće, antiseptički, pomaže u obnovi epitela i osvježava.** Središnji jastučić je visoko prozračan, elastičan i prilagodljiv. Upija tekućine bez prijanjanja uz ranu.

#### Namjena:

- Prikladno za postoperativne rane i prvu pomoć.
- U liječenju ozljeda, kao što su posjekotine i ogrebotine.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
891850	5x7 cm	6 pz	48	 A978241469
891801	10x10 cm	6 pz	48	 A978241471





- VODOOTPORAN
- PROZRAČAN
- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- VELIKA LJEPLJIVOST, ČAK I TIJEKOM URANJANJA U VODU
- BARIJERA PROTIV VODE I BAKTERIJA

## EURODERM PLUS

### Sterilni ljepljivi flaster od prozirnog, vodootpornog poliuretana

Sterilan postoperativan flaster, tanak nepropustan za vodu i bakterije. Podloga je izrađena od prozirnog i vrlo prozračnog poliuretana. Ima središnji jastučić koji upija, bez prijanjanja uz ranu. Vodonepropusnost Euroderm Plus flastera i otpornost na vodu omogućuju pacijentima redovito tuširanje ili kupanje. Jednostavan za primjenu, ne trga se i osigurava odličnu stabilnost na mjestu primjene.

#### Namjena:

Posebno se koristi gdje je potreban flaster propusan na vodenu paru: postoperativne rane, ogrebotine, površinske rane, manje opekline, dekubitusi i za zaštitu kože u području oko rana.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
897600	5x7 cm	5 kom	48	 A927263044
897602	6x9 cm	5 kom	48	 A927263057
897603	10x10 cm	5 kom	48	 A927263069
897605	15x8 cm	5 kom	48	 A927263071
897607	10x25 cm	3 kom	48	 A927263083





- BEZBOLNO SKIDANJE
- NE LJEPI SE ZA RANU
- TRANSPARENTAN
- SLABA EKSUDACIJA
- PRILAGODLJIV



- TRANSPARENTNA
- HIPOALERGENA
- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- SREDNJA/VISOKA EKSUDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROMETAL

### Hipoalergeni sterilni, ljepljivi flaster s centralnim jastučićem od aluminija

Sterilan ljepljivi flaster koji se ne lijepi za ranu, s upijajućim središnjim jastučićem, obloženim najčišćim aluminijem, idealan za brže zacjeljivanje rana. Prilagodljiv, hipoalergijski i prozračan, ne prianja uz ranu što olakšava zamjenu flastera bez ometanja procesa ozdravljenja.

#### Namjena:

- Za zbrinjavanje bilo koje vrste ozljeda, posebno preporučen za: ogrebotine, opekline, kemijske opekline, kirurške rane i za prvu pomoć.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
891902	15x8 cm	6 kom	48	 A908284742

## EURODRESSING

### Sterilna neljepljiva kompresa od netkanog materijala

Sterilna **neljepljiva** kompresa od netkanog materijala, **ne prianja uz ranu**, prozračna je, hipoalergijski i visoko upijajući. Preporučuje se u svim slučajevima gdje je potrebno brzo upijanje krvi i sekreta.

#### Namjena:

Koristi se za zbrinjavanje rana, ogrebotina, otvorenih ulkusa uključujući dekubituse, te u svim slučajevima gdje je potrebno brzo upijanje krvi i izlučevina. Promjena komprese ne uzrokuje ozljedu tkiva, te se ne lijepi za ranu.

**Također se preporučuje za novorođenčad nakon uklanjanja pupčane vrpce.**

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892103	10x10 cm	6 kom	48	 A908376179



# FLASTERI ZA REZANJE





- ANTISEPTIK
- POGODNO ZA OSJETLJIVU KOŽU
- SREDIŠNJI UPIJAJUĆI JASTUČIĆ
- UMIRUJUĆE DJELOVANJE
- TRANSPARENTAN
- POTIČE ZACJELJIVANJE
- MEKAN I PRILAGODLJIV
- MOGUĆNOST REZANJA PREMA POTREBAMA
- NE SADRŽI LATEKS

## LONGFIX ALOE

### Ljepljivi flaster za rezanje u roli s jastučićem od Aloe Vere

Ljepljivi flaster za rezanje s jastučićem od aloe vere, posebno pogodan za osjetljivu kožu. Proзраčan, elastičan, hipoalergijski i umirujući. **Aloe vera ima zacjeljujuća i antiseptička svojstva.** Može se rezati prema različitim potrebama.

#### Namjena:

- Idealno za pokrivanje i zaštitu malih svakodnevnih rana kao što su posjekotine, ogrebotine i porezotine.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
861002	0,5 m x 6 cm	1 kom	48	 A970434155
861003	0,5 m x 8 cm	1 kom	48	 A970434167
861005	1 m x 6 cm	1 kom	48	 A970434179
861006	1 m x 8 cm	1 kom	48	 A970434181



- POGODNA ZA OSJETLJIVU KOŽU
- SREDIŠNJI UPIJAJUĆI JASTUČIĆ
- TRANSPARENTAN
- FLEKSIBILNA
- POTIČE ZACJELJIVANJE
- MEKAN I PRILAGODLJIV
- MOGUĆNOST REZANJA PREMA POTREBAMA
- NE SADRŽI LATEKS

## LONGFIX

### Ljepljivi flaster od natkanog materijala u roli


Ljepljivi flaster u trakama od netkanog materijala. Proзраčan, elastičan, hipoalergijski i umirujući, s neprianjajućim longitudinalnim jastučićem. Može se rezati prema različitim potrebama.

#### Namjena:

- Idealan za pokrivanje i zaštitu malih svakodnevnih rana kao što su posjekotine, ogrebotine i porezotine.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
740002	0,5 m x 6 cm	1 kom	48	 A923327617
740003	0,5 m x 8 cm	1 kom	48	 A923327629
740005	1 m x 6 cm	1 kom	48	 A925018588
740006	1 m x 8 cm	1 kom	48	 A925018590

# FLASTERI

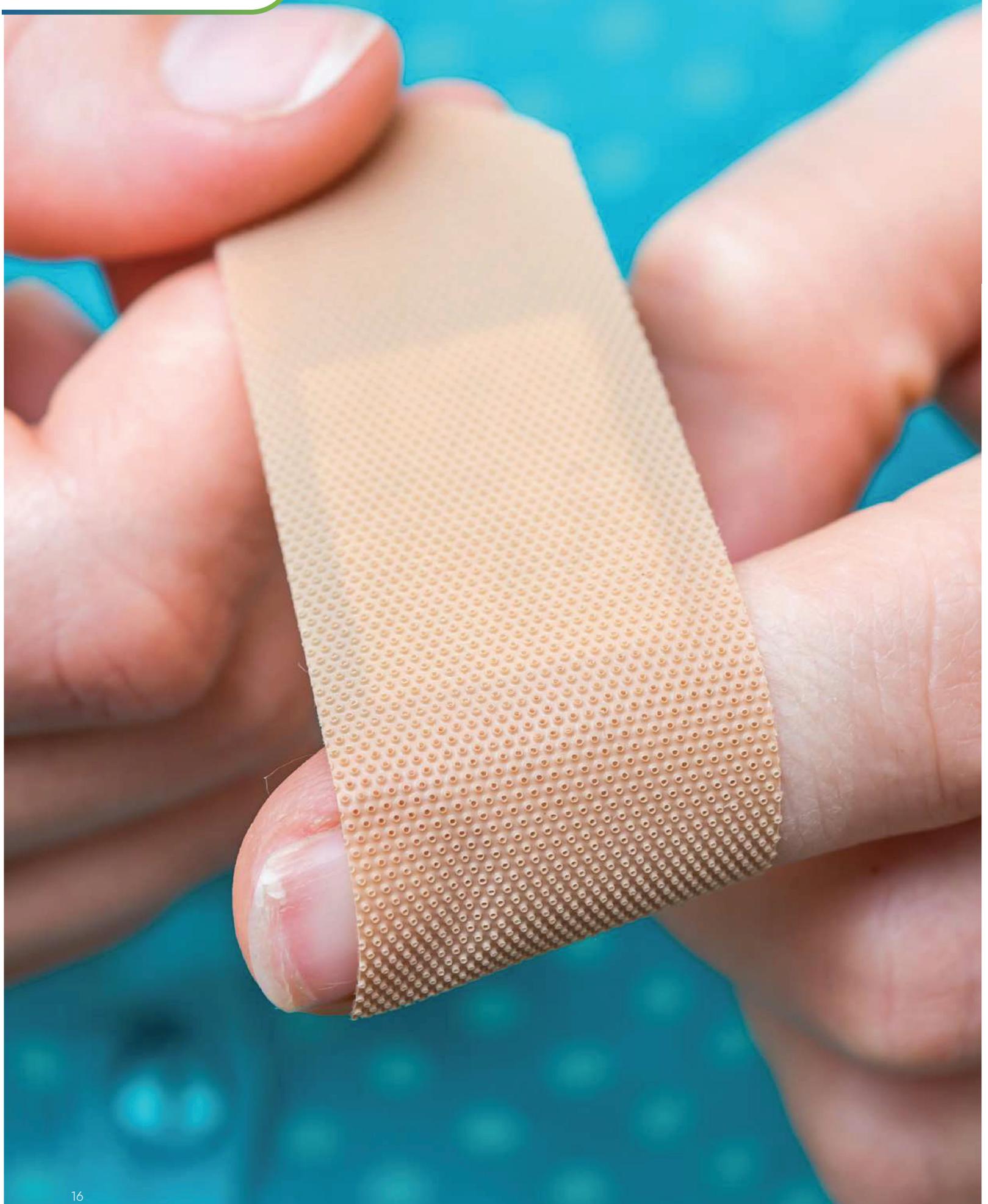



- SA ALOE VEROM
- TRANSPARENTAN
- POTIČE ZACJELJIVANJE
- ANTISEPTIČKO DJELOVANJE
- VODOOTPORAN

## EUROSTRIPS ALOE

### Sterilni hipoalergeni flaster

Flasteri od mikroperforiranog ružičastog polietilena, visoko prozračni, elastični i voodoporni. Jastučić smješten u središtu ljepljivog područja ima visoku sposobnost upijanja i impregniran je **aloe verom, koja je poznata po svojim svojstvima obnove epitela, umirujućim i antiseptičkim učincima**. Jastučić se ne lijepi za ranu zahvaljujući posebnom neprianjajućem sloju, što omogućuje bezbolno skidanje flastera.

#### Namjena:

- Za ljekovitu prvu pomoć kod manjih rana na prstima ili drugim vrlo pokretljivim dijelovima tijela

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
826051	<b>Medium</b> 19 mm x 72 mm	20 kom	72	 A970177301
826056	<b>Medium i Large</b> 19 mm x 72 mm 25 mm x 72 mm	20 kom	72	 A971060114
826055	<b>Razni</b>	20 kom	72	 A971060090



KOMPRESA OD ALOE VERE  
IMA REEPITALIZACIJSKO,  
UMIRUJUĆE I ANTISEPTIČKO  
DJELOVANJE.





- ZAUSTAVLJA KRVARENJE MANJIH RANA
- HEMOSTATSKI UČINAK
- ELASTIČAN
- HIPOALERGEN
- PROZIRAN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROSTRIPS EMO-STOP

### Flasteri s brzim hemostatskim učinkom

Sterilni flaster s hemostatičkim jastučićem za male rane. Specijalna kompresna smještena u središtu ljepljivog područja sastoji se od super-upijajućih vlakana koja **brzo povećavaju svoj volumen** prilikom upijanja krvi, čime se postiže hemostatički učinak koji sprječava curenje. Eurostrips emo-stop je fleksibilan, elastičan, prozračan, hipoalergijski i vodootporan

#### Namjena:

- Za previjanje manjih rana.
- Zaustavlja krvarenje malih rana.
- Brzo zaustavljanje ili zadržavanje krvarenja
- Za fistule.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
826283	31x72 mm	12 kom	72	 A973294465





- VODOOTPORAN
- TRANSPARENTAN
- ELASTIČAN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROSTRIPS

### Sterilni hipoalergeni flasteri

Flasteri od polietilena, prozračni, sterilni i otporni na vodu. Elastična podloga omogućuje izvrsnu prilagodljivost obliku tijela.

#### Namjena:

- Korisno za prvu pomoć
- Za previjanje manjih rana na prstima ili drugim pokretljivim dijelovima tijela.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
826002	<b>Medium</b> 19 mmx72 mm	24 kom	72	 A911294813
826003	<b>Medium i Large</b> 19 mmx72 mm 25 mmx72 mm	20 kom	72	 A925018537
826021	<b>Razni</b>	20 kom	72	 A923381558





- HEMOSTATSKI UČINAK
- ELASTIČAN
- TRANSPARENTAN
- HIPOALERGEN
- VODOOTPORAN
- OD PROZIRNOG POLIURETANA
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROSTRIPS WATER BARRIER EMO-STOP


### Prozirni PU flasteri s brzim hemostatskim djelovanjem

Prozirni flasteri od poliuretana otporni na vodu, bakterije i viruse, s hemostatičkim jastučićem. Posebna kompresa smještena u središtu ljepljivog područja sastoji se od super-upijajućih vlakana koja brzo povećavaju svoj volumen prilikom upijanja krvi, čime se postiže hemostatički učinak koji sprječava curenje. Fleksibilni, sterilni, prozirni, tanki i nepropusni za bakterije. Štiti ranu tijekom dugotrajnih uranjanja u vodu. Osigurava bezbolno skidanje.

#### Namjena:

- Za previjanje malih rana na prstima ili drugim pokretljivim dijelovima tijela.
- Zaustavljaju krvarenje malih rana
- Idealan za tuš i kupaonicu.
- Za fistule.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
831033	31x72 mm	12 kom	48	 A980860757

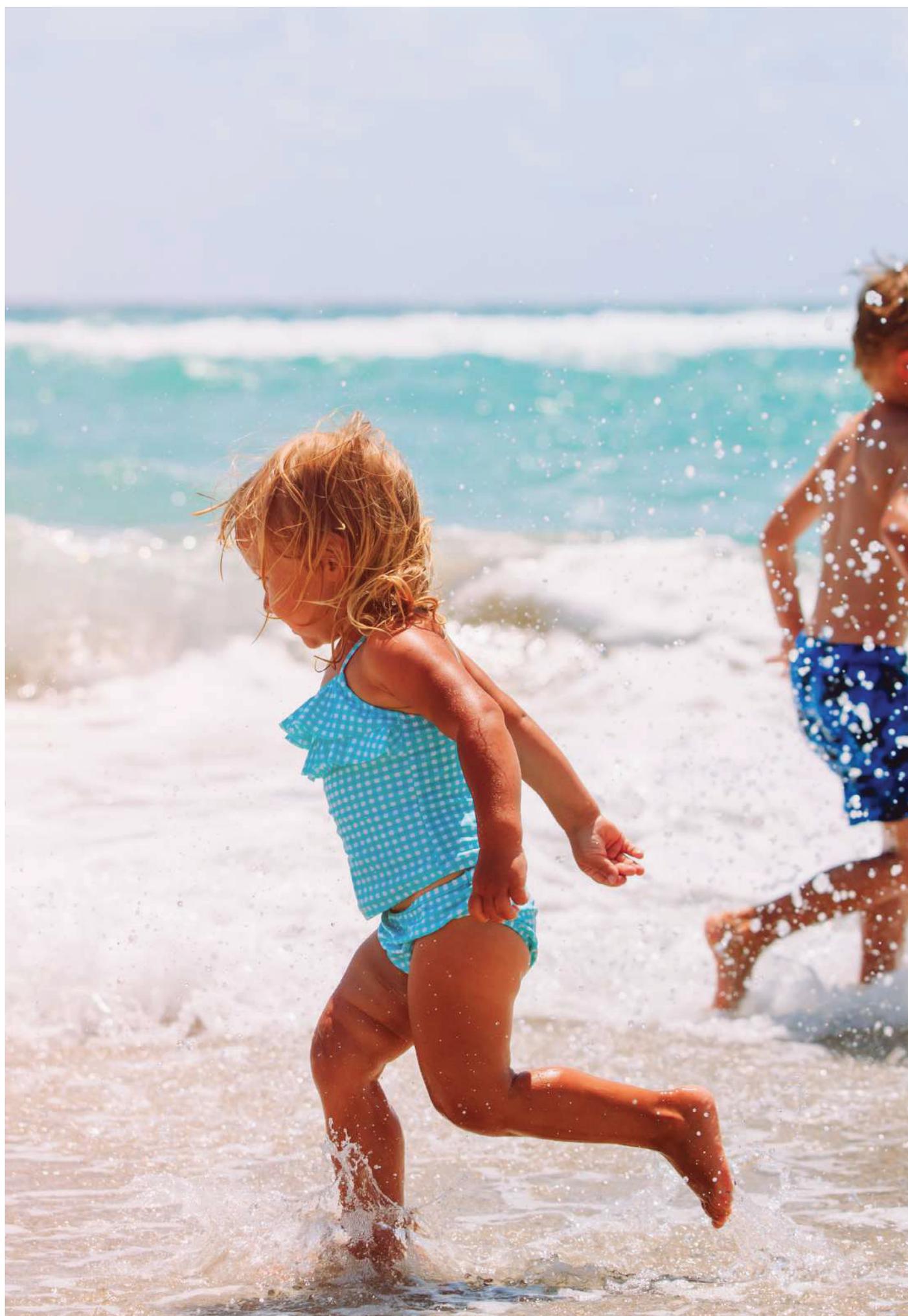



- ZA NJEŽNU KOŽU
- HIPOALERGEN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROREEL

### Ljepljiva traka od pamuka

Flaster traka na kolutu od pamuka, prozirna, s ljepljivom masom sastavljenom od kaučuka, prirodnih smola i cinkovog oksida.

#### Namjena:

- Posebne primjene kao što su: pričvršćivanje bandaža i zavoja, sondi, katetera i kanila
- Idealno za kutije prve pomoći.

#### BIJELI

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
801011	5mx1,25cm	1 kom	36	 A908544846
801012	5mx2,5cm	1 kom	24	 A908544859
801015	5mx5cm	1 kom	12	 A908544861
801020	5mx10cm	1 kom	6	 A908313695

#### ROZA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
802011	5mx1,25cm	1 kom	36	 A927263689
802012	5mx2,5cm	1 kom	24	 A927262941
802015	5mx5cm	1 kom	12	 A927262954



- ZA NJEŽNU KOŽU
- HIPOALERGEN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROPOR

### Ljepljiva traka od netkanog materijala

Flaster traka na kolutu od netkanog materijala na temelju celuloznih vlakana, porozan, prozračan, s ljepljivom hipoalergijskom masom.

#### Namjena:

- Posebne primjene kao što su: pričvršćivanje bandaža i zavoja, sondi, katetera i kanila
- Idealno za kutije prve pomoći.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
807001	5mx1,25cm	1 kom	36	 A908544909
807002	5mx2,5cm	1 kom	24	 A908544911
807005	5mx5cm	1 kom	12	 A908544923



- ZA NJEŽNU KOŽU
- HIPOALERGEN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROSILK

### Svilena ljepljiva traka

Flaster traka na kolutu od svile za osjetljivu kožu, prozračan, s ljepljivom hipoalergijskom masom.

#### Namjena:

- Posebne primjene kao što su: pričvršćivanje bandaza i zavoja, sondi, katetera i kanila
- Idealno za kutije prve pomoći.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
809001	5mx1,25 cm	1 kom	36	 A908544873
809002	5mx2,5 cm	1 kom	24	 A908544885
809005	5mx5 cm	1 kom	12	 A908544897



- TRANSPARENTAN
- HIPOALERGEN
- NE SADRŽI LATEKS

## EUOTRASP

### Prozirna polietilenska ljepljiva traka

Flaster traka na kolutu od prozirnog mikroperforiranog polietilena, s hipoalergijskom akrilnom ljepljivom masom. Otporan na vodu.

#### Namjena:

- Posebne primjene kao što su: pričvršćivanje bandaza i zavoja, sondi, katetera i kanila
- Idealno za kutije prve pomoći.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
812101	5mx1,25 cm	1 kom	36	 A927262966
812102	5mx2,5 cm	1 kom	24	 A927262978
812105	5mx5 cm	1 kom	12	 A927262980



- ZA OSJETLJIVU KOŽU
- TRANSPARENTAN
- PRILAGODLJIV
- LAKO REZIV
- NJEŽAN
- ATRAUMATSKO SKIDANJE
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROFIX


### Ljepljiva flaster traka u roli od netkanog materijala

Flaster traka u roli od netkanog materijala, visoko prozračna, vrlo mekana, dermatološki prihvatljiva i hipoalergijska. Posebno ljepilo ne slabi u kontaktu s vodom i izlučevinama. Silikonski papir koji štiti ljepljivu stranu unaprijed je izrezan kako bi se olakšalo odvajanje. Preporučuje se za fiksiranje svih vrsta obloga. Nježan prema koži.

#### Namjena:

- Posebne primjene kao što su: pričvršćivanje obloga i zavoja, sondi, katetera i kanila

- Idealno za kutije prve pomoći.
- Za fiksiranje na pregibima, zglobovima, dijelovima tijela izloženim čestim pokretima

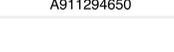Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
891702	5 m x 5 cm	1 kom	24	 A923381560
891708	2,5 m x 10 cm	1 kom	24	 A987456593
891704	10 m x 5 cm	1 kom	24	 A974478986
891705	10 m x 10 cm	1 kom	12	 A974478962
891706	10 m x 15 cm	1 kom	24	 A974478911
715004	10 m x 20 cm	1 kom	24	 A922317603
715006	10 m x 30 cm	1 kom	24	 A911294650



- HIPOALERGEN
- NE SADRŽI LATEKS

## ENTERALFIX

### Sterilni netkani ljepljivi flaster za fiksiranje nazogastrične sonde

Flaster za učvršćivanje nazogastričnih sondi. Enteralfix je ljepljivi flaster od poroznog ružičastog TNT-a koji se sastoji od potporne strukture od celuloznih vlakana, namijenjenog za učvršćivanje nazogastričnih sondi za hranjenje preko kože. Enteralfix je hipoalergijski i sadrži prijanjajuću masu na akrilatnoj bazi, a ima visoku dermatološku toleranciju. Flaster je proziran i ne upija zračenja, prethodno oblikovan, spreman za uporabu te se može atraumatski ukloniti s kože bez ostavljanja ostataka. Također je visoko propustan za zrak i vodenu paru.

#### Namjena:

- Koristi se za pričvršćivanje cjevčica za enteralnu prehranu na kožu.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
724551	6,2 x 5 cm	100 kom	2	 A973965078
724552	3,7 x 3 cm	100 kom	2	 A973965116





## EURODERM ROLL

### Prozirna poliuretanska ljepljiva folija u roli


Prozirna poliuretanska ljepljiva folija u roli, fleksibilna i nepropusna za tekućine i bakterije. Prilagodljiva je nepravilnim anatomskim zonama jer se lako može rezati na željenu veličinu. Osigurava optimalno učvršćivanje svih vrsta obloga i omogućuje visoku prozračnost kože. Prozirna podloga omogućuje kontinuirano praćenje rane bez potrebe za uklanjanjem. Silikonski papir, za zaštitu ljepljive strane, unaprijed je izrezan kako bi se olakšalo odvajanje. Vodonepropusnost i vodootpornost olakšavaju pacijentu dnevnu higijenu.

- VODOOTPORNNA
- ZA REZANJE
- PROZIRNA
- PROZRAČNA
- IDEALNA ZA TETOVAŽE
- TRANSPARENTNA
- NJEŽNA
- ATRAUMATSKO SKIDANJE
- NE SADRŽI LATEKS

#### Namjena:

- Za fiksiranje primarnih i sekundarnih obloga
- Za pričvršćivanje katetera, sonde i kanila
- Za zaštitu kože na mjestima trenja od drenažnih i/ili stoma vrećica
- Za fiksiranje obloga na pregibima, zglobovima, dijelovima tijela izloženim čestim pokretima

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
715607	2 m x 10 cm	1 kom	12	 A985795943
715601	10 m x 5 cm	1 kom	12	 A925008245
715602	10 m x 10 cm	1 kom	12	 A925008284

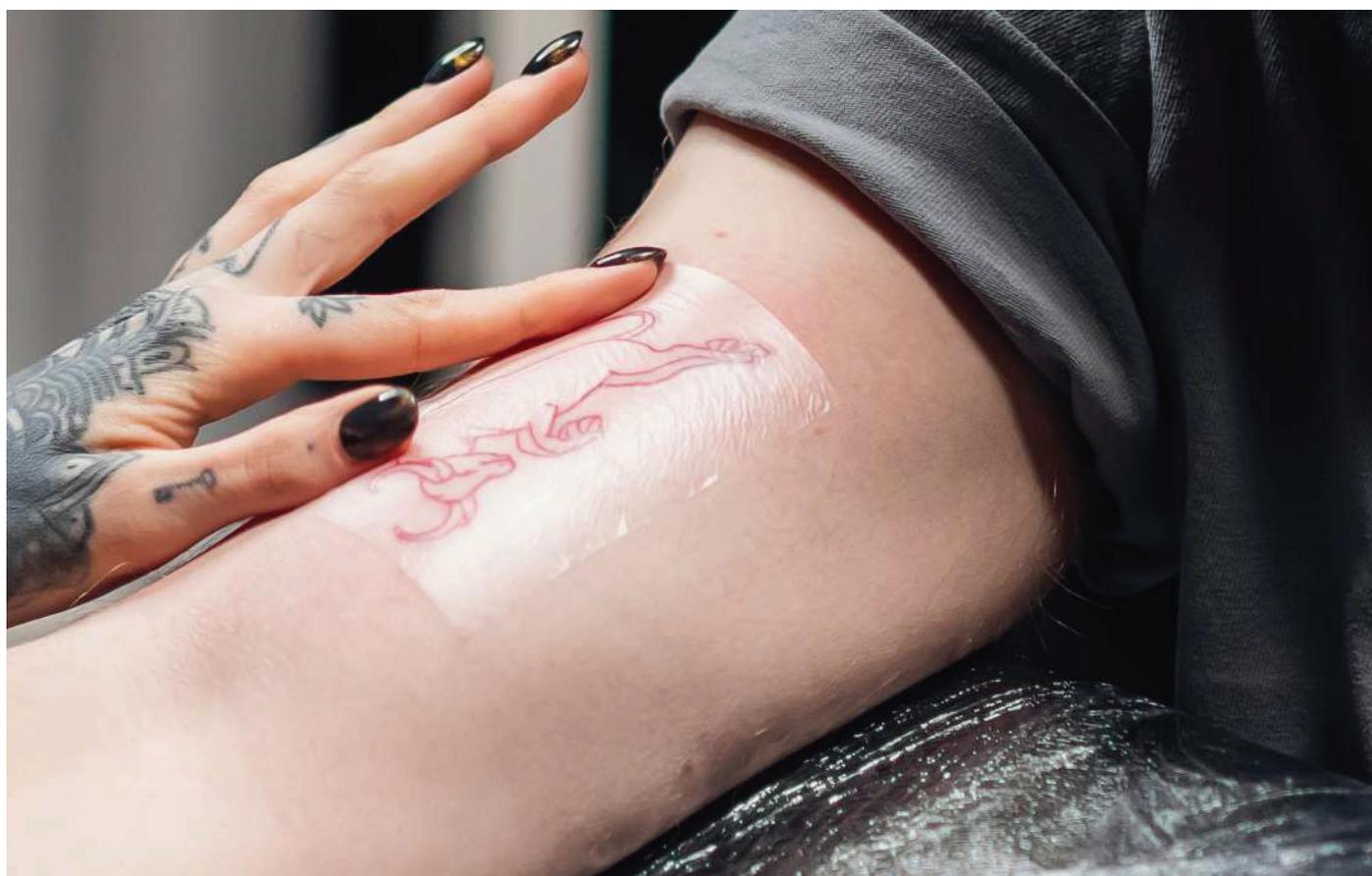

# OČNE KOMPRESY





- POTPUNA SVJETLOSNA BARIJERA
- NJEŽAN ZA KOŽU
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROPTICAL OCCLUSIVO

### Hipoalergenski sterilni ljepljivi zavoj za oči s okluzivnom kompresom

Sterilna ljepljiva očna kompresa od netkanog materijala, neprianjajuća, s upijajućim okluzivnim jastučićem, idealna za strabizam. Namijenjena je za profilaksu i liječenje slabovidnosti, osigurava maksimalnu zaštitu.

#### Namjena:

- Kod strabizma
- Za profilaksu
- Za liječenje slabovidnosti

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892300	5,2x6,4 cm	6 kom	48	 A927142568
892301	5,7x8,2 cm	7 kom	48	 A908284870
717200	5,2x6,4 cm	50 kom	1	 A927263032



- TRANSPARENTAN
- NJEŽAN ZA KOŽU
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROPTICAL NON OCCLUSIVO

### Hipoalergenski sterilni ljepljivi zavoj za oči

Sterilni ljepljivi očni flaster od netkanog materijala, neprianjajuć s upijajućim jastučićem, idealan za korekciju lijenog oka kod djece, osigurava maksimalnu zaštitu.

#### Namjena:

- Postoperativni flaster ugodan za kožu
- Za obloge očiju i područja oko očiju
- Za korekciju lijenog oka kod djece

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892351	5,2x6,4 cm	6 kom	48	 A925604439
892352	5,7x8,2 cm	6 kom	48	 A923327555
717210	5,2x6,4 cm	50 kom	1	 A926264019

## TRAKE ZA ZATVARANJE





- ZA ZATVARANJE LEZIJA NA KOŽI
- IZVRSNI ESTETSKI REZULTATI
- SMANJUJE RIZIK OD INFEKCIJA
- NE SADRŽI LATEKS
- DERMATOLOŠKI TESTIRANO



## EUROSUTURE

### Flaster za šivanje, hipoalergijski

Sterilni flaster za kožne šavove od tankog i otpornog polimernog netkanog materijala, zalijepljen hipoalergenom ljepljivom masom. Idealan za upotrebu u estetskoj kirurgiji te na pedijatrijskim i gerijatrijskim odjelima. Lako se nanose, mogu se koristiti umjesto tradicionalnih šavova.

#### Namjena:

- Mogu se koristiti na nepristupačnim dijelovima tijela ili na mjestima gdje s prisutni nabori, pregibi i pokreti.
- Koristi se u estetskoj kirurgiji, za spajanje rubova srednje dubokih rana i kod posjekotina.

#### Prednosti i svojstva:

- Dostupan u raznim veličinama.
- Zaobljeni rubovi sprječavaju uvijanje traka.
- Brzo i jednostavno nanošenje.
- Prozračna, porozna tkanina.
- Hipoalergen.
- Smanjite rizik od infekcije.
- Smanjuju stvaranje ožiljaka izbjegavajući ružne tragove od šavova

#### BOJA KOŽE

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
817461	3x7,5 mm	10 kom	48	 A985832789
817462	6x38 mm	12 kom	48	 A985832791
817463	6x75 mm	12 kom	48	 A985832839
817464	6x100 mm	10 kom	48	 A985832841
817465	13x100 mm	12 kom	48	 A985832854

#### BIJELA BOJA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
817410	3x75 mm	10 kom	48	 A927263095
817420	6x38 mm	12 kom	48	 A927263107
817430	6x75 mm	6 kom	48	 A927263119
817450	13x100 mm	12 kom	48	 A927263121



# TRAHEOTOMIJSKA KOMPRESA





## TRACHEOPAD

### Sterilna kompresna od aluminiziranog netkanog materijala za korištenje oko traheotomija

Kompresa obložena aluminijem od netkanog materijala za zbrinjavanje traheotomija, nefrostomija i većih drenaža. Središnji otvor se lako prilagođava traheotomijskoj cijevi. Zahvaljujući visokoupijajućoj moći krvi i sekreta, održava površinu rane suhom.


- BARIJERA PROTIV VODE I BAKTERIJA
- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- SREDNJA / VISOKA EKSDACIJA
- JEDNOSTAVNA ZA PRIMJENU I UKLANJANJE
- NE SADRŽI LATEKS

#### Namjena:


Podlošci za endotrahealnu kanilu

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
717320	8x9,3cm	50 kom	2	 A925008409

### PREDNOSTI I SVOJSTVA:

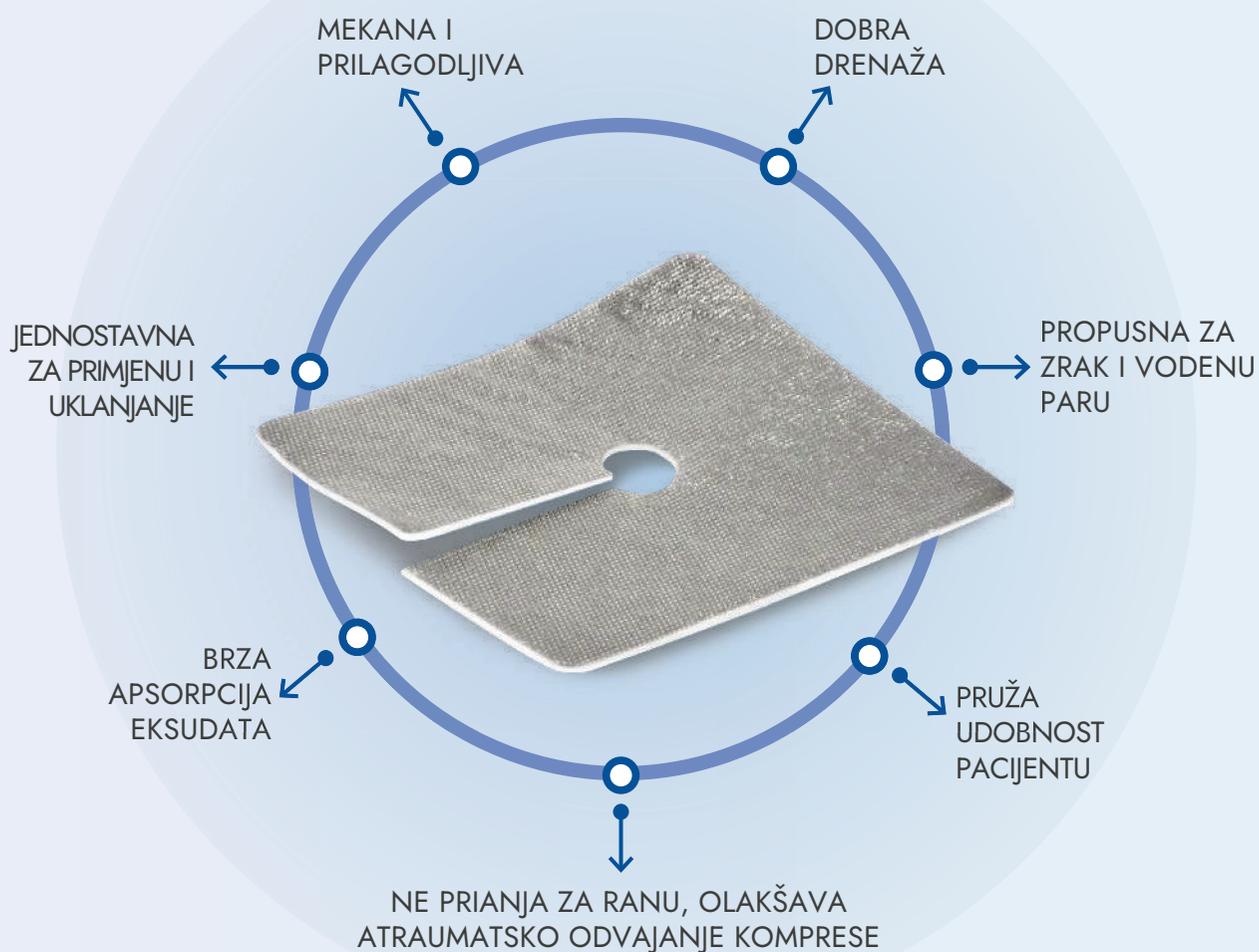

# NAPREDNE OBLOGE

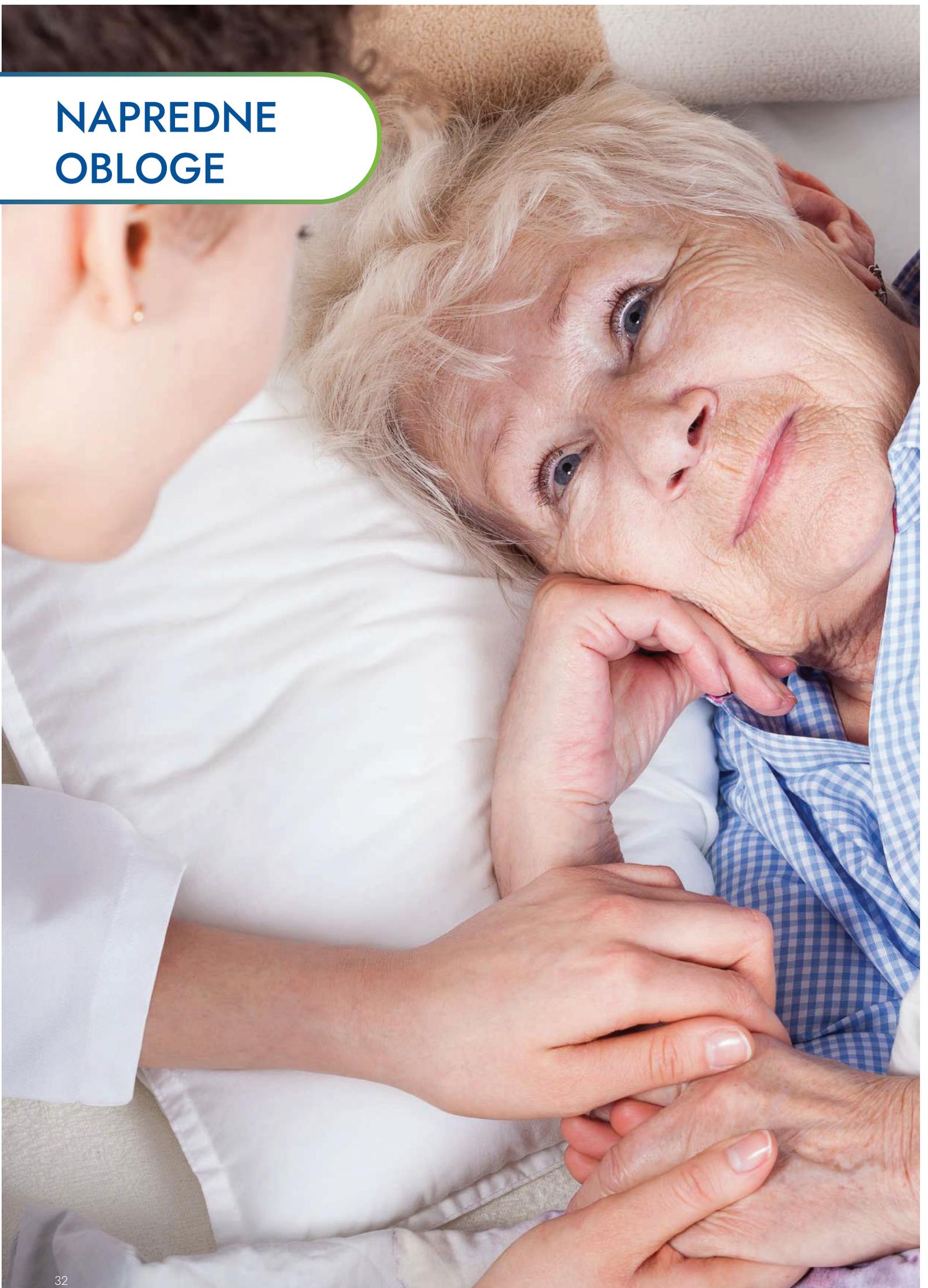

- MOŽE SE REZATI NA ŽELJENU VELIČINU
- NE LIJEPI SE NA RANU
- SREDNJA/VISOKA EKSUDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURONET PARAFFIN

### Sterilni impregnirani zavoj od pamučne gaze s parafinom



Euronet Paraffin je sterilna gaza izrađena od 100% upijajućeg pamuka, impregnirana bijelim mekim parafinom. Euronet Paraffin se koristi za zbrinjavanje rana, u slučaju blagih ili težih opekline, za oblaganje područja na kojima je izvršen kožni presadak ili uzimanje kože, te posebno za zbrinjavanje kože koja je pretrpjela razderotine ili ogrebotine. Masna gaza se također uspješno koristi u liječenju kroničnih rana jer omogućuje zbrinjavanje rana bez uklanjanja dijelova kože, čime se omogućuje brže i bezbolnije zacjeljivanje. Jednostavna je za primjenu, jednokratna, sigurna, higijenska i pomaže bržem oporavku. Može se rezati na komade potrebne veličine.

#### Namjena:

- Transplantacija kože i fiksacija transplantata kože.
- Vaskularni ulkusi i dekubitusi.
- Opeklinae, posjekotine i ogrebotine.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
560110	10x10 cm	10 kom	10	 A975044405
560020	20x7,5 cm	10 kom	10	 A975517929

- VISOKA SPOSOBNOST UPIJANJA
- VISOKA KOHEZIJSKA ČVRSTOĆA GELA
- NE LIJEPI SE ZA RANU
- BEZBOLNO SKIDANJE
- NISKA / SREDNJA EKSUDACIJA
- TRENUTNO HLAĐENJE I OLAKŠAVANJE BOLOVA
- NE SADRŽI LATEKS



## HYDROMED

### Hipoalergijska hidroaktivna gel obloga

Hydromed je prozirni sterilna gel obloga s udjelom vode većim od 70%. Stvara vlažnu okolinu koja doprinosi optimalnom cijeljenju, značajno smanjuje bolne simptome i potiče angiogenezu. Nanesena na ranu daje trenutačni osvježavajući i umirujući učinak, potiče brzi debridman suhe nekroze i hidrataciju krasti, apsorbira i zadržava eksudate. Primijenjen na leziju, rehidrira nekrotična tkiva delikatnim uklanjanjem. Apsorbira višak eksudata iz rane, a gel ponovno stvara vlažnu okolinu na površini rane, sprječava nastajanje ljuskica i ubrzava migraciju epitelnih stanica.

#### Namjena:

- Za ulkuse s fibroznim ili nekrotičnim dnom
- Za "debridman" nekrotičnog tkiva.
- Za opekline 1. i 2. stupnja, radiodermatitis
- Za opekline od sunca, lifting lica ili druge zahvate plastične kirurgije.
- Također se koristi u tretmanima estetske kirurgije.



Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892011	6,5x5 cm	5 kom	10	 A900047135
892013	10x10 cm	5 kom	10	 A900047186
892015	15x15 cm	5 kom	10	 A900047337
892017	20x20 cm	3 kom	10	 A904005372

- LAGANO ZA NANOŠENJE / SKIDANJE
- REHIDRATIRA NEKROTIČNA TKIVA
- UPIJA VIŠAK EKSDATA IZ RANE
- BOKOMPATIBILAN
- TRANSPARENTAN



## HYDROMED GEL

### Amorfni hidrogel



Sterilni amorfni gel, proziran, indiciran za uklanjanje nekrotičnog tkiva. Rehidrira nekrotično tkivo, uklanjajući ga bez oštećenja novoformiranog tkiva ili uzrokovanja traume pacijentu. Hydromed gel ne prianja uz ranu i može se ukloniti ispiranjem fiziološkom otopinom, bez oštećenja osjetljivog novoformiranog tkiva ili izazivanja nelagode pacijentu.

#### Namjena:

- Indiciran je kao primarna obloga za suhe ili blago eksudativne kožne ulkuse, venske, dijabetičke i arterijske ulkuse, površinske opekline, otvorene kirurške rane, dekubituse, razderotine i ogrebotine, fistule, mjesta uzimanja kože za transplantate, kavitarne rane, post-kirurške rane te rane s krastom ili one koje trebaju autolitičko debridiranje,
- može se koristiti kod opekline prvog i drugog stupnja,
- jednostavan za primjenu i uklanjanje,
- rehidrira nekrotično tkivo, nježno ga uklanjajući

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
501705	Tubo singolo da 15 gr	1 kom	10	 A938387281

- TRANSPARENTNA
- PROZIRANA
- BARIJERA PROTIV VODE I BAKTERIJA



## EURODERM

### Sterilna prozirna poliuretanska obloga



Sterilna ljepljiva obloga, tanka, izrađena od prozirne poliuretanske folije, rastezljiva i hipoalergijska. Euroderm je visoko otporan na tekućine i bakterije, ali propušta vodenu paru i kisik, održavajući vlažnu mikroklimu rane bez pucanja kože. Njegova prozirnost omogućava stalno praćenje rane bez potrebe za uklanjanjem obloge. Vodootpornost i nepropusnost omogućuju pacijentu redovito tuširanje ili kupanje.

#### Namjena:

- Za površinske rane i opekline.
- Za manje ogrebotine.
- Za zaštitu kože u području oko rana.
- Za učvršćivanje drugih zavoja.
- Za zaštitu kože kod koje postoji opasnost od dekubitusa.
- Nanesena preko šavova sprječava stvaranje keloida.
- Indiciran za zaštitu mjesta umetanja peritonealnih venskih i arterijskih katetera i drugih perkutanih uređaja

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
717507	6x7 cm	100 kom	2	 A975611878
717512	10x12 cm	50 kom	2	 A975611880

- AKTIVNA DO 7 DANA
- TRANSPARENTNA
- PROPUSNA NA ZRAK I VODOOTPORNA
- ATRAUMATSKO SKIDANJE
- BEZ OSLOBAĐANJA OSTATAKA LJPILA
- NE KIDA SE
- NEPROPUSNA ZA MIKROORGANIZME,  
SMANJUJE RIZIK OD SEKUNDARNIH INFEKCIJA



## EURODERM IODINE

### Prozirna antimikrobna obloga od poliuretana i povidon-jodida


Sterilna, tanka, ljepljiva obloga od 100% poliuretanskog filma s povidon-jodidom. Rastezljiva, prozirna, prijanjajuća i hipoalergena. Atraumatsko lagano skidanje sa kože bez oslobađanja ostataka ljepila. Jamči kontinuirano antimikrobno djelovanje do 7 dana.

#### Namjena:

- Tamo gdje je potrebna obloga koji propušta vodenu paru, npr. održavanje vlažnog okruženja idealno je za ponovnu epitelizaciju tkiva u području lezije
- Kao primarna obloga na površinskim lezijama
- Za abrazije
- Za manje opekotine
- Za zaštitu kože u području oko rane
- Kao sekundarna obloga

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
717537	4x5 cm	100 kom		
717539	6x7 cm	100 kom		
717543	10x12 cm	50 kom		
717544	15x20 cm	50 kom		

- AKTIVNA DO 7 DANA
- TRANSPARENTNA
- PROPUSNA NA ZRAK I VODOOTPORNA
- ATRAUMATSKO SKIDANJE
- BEZ OSLOBAĐANJA OSTATAKA LJEPILO
- NE KIDA SE
- NEPROPUSNA ZA MIKROORGANIZME  
SMANJUJE RIZIK OD SEKUNDARNIH INFEKCIJA

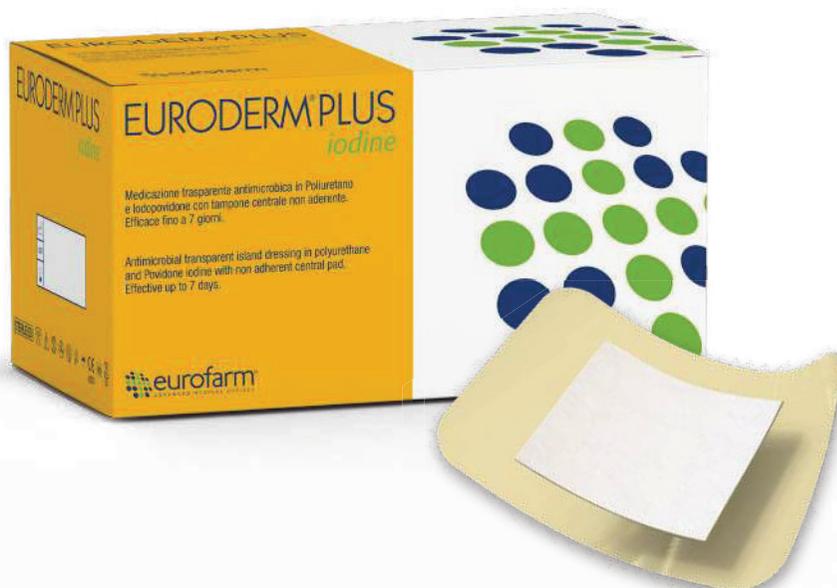

## EURODERM PLUS IODINE

### Transparentna antimikrobna obloga od poliuretana i povidon-jodida s centralnim jastučićem

Postoperativna ljepljiva, sterilna obloga od 100% poliuretana s povidon-jodidom. Rastezljiva, prilagodljiva, transparentna, nepropusna za tekućine i bakterije, a propusna za vodenu paru, osiguravajući visoku prozračnost. Jamči kontinuirano antimikrobno djelovanje.

#### Namjena:

- Zbrinjavanje kirurških rana
- Za ogrebotine i površinske rane
- Za manje opekotine
- Za dekubituse i zaštitu kože u perilezijskom području
- Omogućuje upravljanje s niskim do obilnim eksudatom, održavajući mikrookruženje rane vlažnim kako bi se pospješilo zacjeljivanje

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
717630	5x7 cm	100 kom		
717632	6x9 cm	50 kom		
717633	10x10 cm	50 kom		
717635	15x8 cm	50 kom		

- DJELUJE ANTIBAKTERIJSKO
- PROPUSNA ZA ZRAK I VODENU PARU
- MEKANA
- HIPOALERGENA
- ATRAUMATSKA PROMJENA
- SPREMNA ZA KORIŠTENJE I NIJE POTREBNA AKTIVACIJA
- POTIČE STVARANJE GRANULACIONOG TKIVA I POSLJEDIČNU REEPITELIZACIJU
- SMANJUJE PRISUTNOST DEVITALIZIRANIH TKIVA
- ŠTITI LEZIJU OD EGZOGENE BAKTERIJSKE KONTAMINACIJE
- NE SADRŽI LATEKS



## SILVERMED

### Sterilna ljepljiva obloga s hidroaktivnim srebrom



Sterilna obloga s ljepljivim rubom, upijajuća i neprianjajuća, sa središnjim jastučićem od srebra. Kompresa ima antibakterijsko djelovanje zahvaljujući naprednoj tehnologiji mikroniziranog srebra, koja omogućuje zacjeljivanje u vlažnom okruženju. Srebro se kontrolirano aktivira u dodiru s eksudatom, a ioni srebra se oslobađaju proporcionalno količini eksudata i bakterijskoj opterećenosti izravno u ranu. Stvara vlažnu okolinu idealnu za brže zacjeljivanje, ne prijanja uz leziju, čineći promjenu obloge atraumatskom i ne ostavlja ostatke srebra. Otpušta ione srebra održavajući bakteriostatsko okruženje unutar obloge, štiteći ranu od egzogene bakterijske kontaminacije. Prilagodljiv svakoj vanjskoj anatomskej površini, potiče stvaranje granulacijskog tkiva i posljedičnu reepitelizaciju. Ne zahtijeva sekundarnu fiksirajuću oblogu zbog prisutnosti ljepljivih rubova i održava ranu u uvjetima optimalne vlažnosti.


Smanjuje prisutnost devitaliziranih tkiva.

#### Namjena:

- Opekline drugog stupnja
- Inficirane rane, ulkusi i dekubitusi
- Površinske erozije uzrokovane sekundarnim infekcijama
- Područja kožnih transplantanata
- Opće dermoabrazije

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892063	10x10 cm	5 kom	12	 A900045547
892066	10x20 cm	3 kom	12	 A900046044

- DJELUJE ANTIBAKTERIJSKO
- PROPUSNA ZA ZRAK I VODENU PARU
- MEKANA
- HIPOALERGENA
- ATRAUMATSKA PROMJENA
- SPREMNA ZA KORIŠTENJE I NIJE POTREBNA AKTIVACIJA
- POTIČE STVARANJE GRANULACIONOG TKIVA I POSLJEDIČNU REEPITELIZACIJU
- SMANJUJE PRISUTNOST DEVITALIZIRANIH TKIVA
- ŠTITI LEZIJU OD EGZOGENE BAKTERIJSKE KONTAMINACIJE
- NE SADRŽI LATEKS

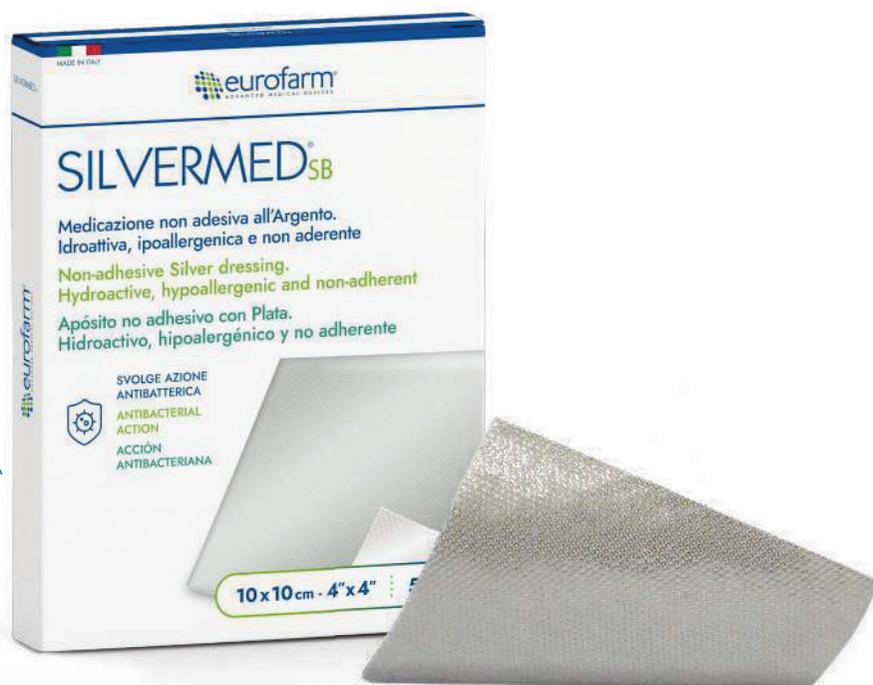

## SILVERMED SB

### Sterilna obloga s hidroaktivnim srebrom



Sterilna obloga, **bez ljepljivog ruba**, upijajuća i neprianjajuća, sa središnjim jastučićem od srebra, spreman za upotrebu. Kompresa ima **antibakterijsko djelovanje** zahvaljujući naprednoj tehnologiji mikroniziranog srebra, koja omogućuje zacjeljivanje u vlažnom okruženju. Srebro se kontrolirano aktivira u dodiru s eksudatom, a ioni srebra se oslobađaju proporcionalno količini eksudata i bakterijskoj opterećenosti izravno u ranu. Stvara idealno vlažno okruženje za brže cijeljenje rana, ne prijanja uz leziju, čineći promjenu obloga atraumatskom i ne ostavlja ostatke srebra. Prilagodljiva svakoj vanjskoj anatomskej površini, potiče stvaranje granulacijskog tkiva i posljedičnu reepitelizaciju. Smanjuje prisutnost devitaliziranih tkiva.

#### Namjena:

- Opekotine drugog stupnja
- Inficirane rane, ulkusi i dekubitusi
- Površinske erozije uzrokovane sekundarnim infekcijama
- Područja kožnih transplantanata
- Opće dermoabrazije

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892073	10x10 cm	5 kom	12	 A900046549
892076	10x20 cm	3 kom	12	 A900046792

- ALGINATNA OBLOGA KOJI UPIJA EKSUDAT I ZADRŽAVA GA IZMEĐU SVOJIH VLAKANA
- VERTIKALNA APSORPCIJA
- OSTAJE ČITAVA NAKON UKLANJANJA
- PRETVARA SE U GEL KOJI NE PRIPIJA ZA RANU I BLOKIRA LATERALNU MIGRACIJU EKSUDATA
- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- PRILAGODLJIVA
- OSLOBAĐA IONE KALCIJA NA RANU
- LAGANO SKIDANJE U JEDNOM DIJELU, NE KIDA SE
- SREDNJA / VISOKA EKSUDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS



## EUROSORB

### Obloga od kalcijevog alginata

Eurosorb je sterilna primarna obloga koja se može prilagoditi, mekana i visoko upijajuća, izrađena od gelirajućih vlakana kalcijevog alginata. Ne prijanja na ranu. U kontaktu s eksudatom iz rane Eurosorb formira biokompatibilni gel koji održava fiziološki vlažno okruženje, potiče proces zacjeljivanja i stvaranje granulacijskog tkiva. Eurosorb može apsorbirati količinu eksudata do 15 puta veću od vlastite težine. Ovaj alginatni oblog apsorbira eksudat i zadržava ga među vlaknima. Može se ukloniti u jednom komadu bez ostavljanja ostataka. Zadržava eksudat čak i pod okluzivnim zavojima. Smanjuje rizik od maceracije kože na perilezijskim rubovima rane.

#### Namjena:

- Za rane s umjerenom do jakom eksudacijom kao što su: venski ulkusi, dekubitusi i područja kožnih transplantanata.
- Eurosorb je indiciran za hiperekudirajuće kavitarne lezije.

#### Kontraindikacije:

Nemojte koristiti Eurosorb na suhim ranama, opeklinama 3. stupnja i kirurškim implantatima.



Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
501505	5x5 cm	10 kom	10	 A922317716
501510	10x10 cm	10 kom	10	 A903068070
501520	10x20 cm	5 kom	10	 A922317728

#### EUROSORB ROLL

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
501630	2,5x30 cm	5 kom	5	 A903068094

- VERTIKALNA APSORPCIJA
- HIDROAKTIVNA OBLOGA
- TVORI KRISTALNI GEL KOJI POMAŽE U ODRŽAVANJU VLAŽNOG OKRUŽENJA KAKO BI SE OLAKŠAO PROCES CIJELJENJA RANA
- DOPRINOSI UKLANJANJU NEKROTIČNOG TKIVA RANE
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- SREDNJA / VISOKA EKSUDACIJA
- OSTAJE ČITAVA NAKON UKLANJANJA
- BLOKIRA LATERALNU MIGRACIJU EKSUDATA VERTIKALNOM APSORPCIJOM



## EUROCELL HYDRO

### Sterilna hidroaktivna obloga izrađena od vlakana karboksimetil celuloze (CMC)

Hidroaktivna sterilna obloga od vlakana karboksimetil-celuloze (CMC), visoko upijajuća i prilagodljiva. Vlakna karboksimetil-celuloze u kontaktu s eksudatom formiraju mekan biokompatibilni gel visoke otpornosti koji omogućava uklanjanje obloge u jednom komadu, bez potrebe za ispiranjem i bez rizika od oslobađanja vlakana. Indicirana je za liječenje akutnih i kroničnih rana djelomične i pune debljine, umjereno ili jako eksudirajućih. Atraumatsko uklanjanje, može se koristiti ispod kompresivnih zavoja. Može se izrezati na željenu veličinu bez promjene sposobnosti upijanja tekućine i upravljanja.



Usporedni testovi su pokazali da Eurocell Hydro obloga za rane ima izvrsne performanse u usporedbi s vodećim CMC gelirajućim oblogama na tržištu.

Performanse:

- sposobnost upijanja, jer apsorbira visoke razine eksudata tijekom uporabe;
- sposobnost zadržavanja tekućine, jer zadržava eksudate čak i pod kompresijom;
- postojan, sposobnost da ostane u jednom komadu kod promjene obloge bez rizika od oslobađanja vlakana

#### Namjena:


- Venski ulkusi, dekubitusi stadij II-IV, dijabetičko stopalo
- Kirurške rane
- Mjesta uzimanja kožnih transplantanata
- Površinske opekotine i opekotine djelomične debljine.
- Traumatske rane (npr. abrazije i razderotine).
- Apsorpcija eksudata kod onkoloških ulkusa (npr. vegetirajući tumori kože, kožne metastaze i Kaposijevi sarkomi).

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
895005	5x5 cm	10 kom	10	 A927263145
895010	10x10 cm	10 kom	10	 A927263158
895012	10x20 cm	5 kom	10	 A927263172
895015	15x15 cm	5 kom	10	 A927263160

#### EUROCELL HYDRO ROLL

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
895630	2,5x45 cm	5 kom	10	 A927263184

- VERTIKALNA APSORPCIJA
- IZBJEGAVA MACERACIJU PERILEZIJSKE KOŽE POD KOMPRESIJOM
- MOŽE SE REZATI BEZ PROMJENE KAPACITETA UPIJANJA I UPRAVLJANJA TEKUĆINOM
- NE DEFORMIRA SE NAKON UPIJANJA TEKUĆINA
- LAGANO SKIDANJE U JEDNOM DIJELU
- VEĆA ČVRSTOĆA VLAKANA DO 9 PUTA U ODNOSU NA EUROCELL HYDRO

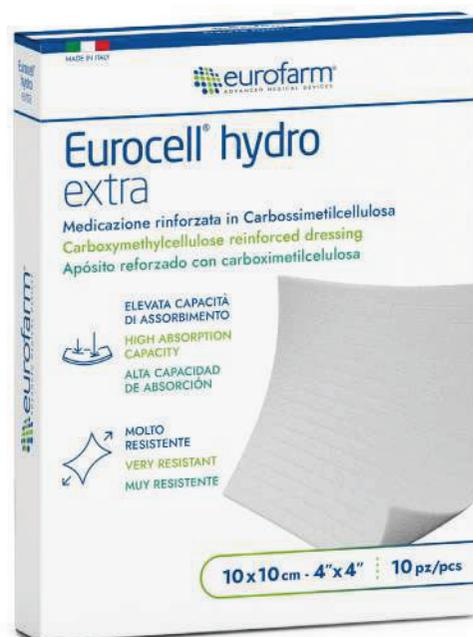

## EUROCELL HYDRO EXTRA

### Pojačana obloga od karboksimetilceluloze

Sterilna neljepljiva obloga od čistih, visokoupijajućih i prilagodljivih vlakana natrijeve karboksimetilceluloze (CMC) i dvodimenzionalnih CMC vlakana za ojačanje. Upija eksudat vertikalno, sprječavajući njegovo širenje prema stranama. Ne oslobađa eksudat u smjeru dna rane.

#### Namjena:

- Venski ulkusi, dekubitusi od II-IV stupnja i dijabetičko stopalo
- Kirurške rane
- Mjesta uzimanja kožnih transplantanata
- Opekotine djelomične debljine
- Traumatske rane (npr. abrazije i razderotine).
- Apsorpcija eksudata kod onkoloških ulkusa (vegetirajući tumori kože, kožne metastaze i Kaposijevi sarkomi).
- Kod kaviteta i površinskih opekotina
- Obloga se može koristiti ispod kompresivnih zavoja i čarapa

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
895065	5x5 cm	10 kom		
895070	10x10 cm	10 kom		
895072	15x15 cm	5 kom		
895075	10x20 cm	5 kom		
895080	20x20 cm	5 kom		
895083	20x30 cm	5 kom		

- NOVA TEHNOLOGIJA TDI PJENE
- VISOKA SPOSOBNOST UPIJANJA
- VERTIKALNA APSORPCIJA
- MEKANA I UDOBNA ZA PACIJENTA, PRILAGOĐAVA SE RAZLIČITIM DIJELOVIMA TIJELA
- HIPOALERGENA
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- SREDNJA / VISOKA EKSDACIJA
- ŠIROKI RASPON VELIČINA KOJE SE MOGU REZATI KAKO BI BOLJE PRISTALE RAZLIČITIM KONTURAMA TIJELA
- PRIKLADNA ZA KORIŠTENJE ISPOD KOMPRESIVNOG ZAVOJA/ČARAPA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM

### Sterilna neljepljiva obloga od poliuretanske pjene

Hidrocelularna poliuretanska pjena s trostrukom strukturom s cjelovitom hidroaktivnom površinom. Ova obloga sastoji se od jednog sloja visoko upijajuće poliuretanske pjene koja osigurava kontrolirano upijanje eksudata, vanjskog filma od prozračnog poliuretana koji sprječava pucanje perilezionalnog područja, te perforiranog filma od poliuretana koja se ne lijepi za ranu, omogućujući bezbolno i atraumatsko uklanjanje. Obloga se savršeno prilagođava samom mjestu rane, stvarajući idealno okruženje za proces zacjeljivanja. Visoka sposobnost upijanja poliuretanske pjene omogućuje smanjenje broja promjena, pružajući pacijentu udobnost i smanjenje troškova u upravljanju ranom. Ne uzrokuje maceraciju perilezijskih rubova rane. Može se rezati bez promjene njegove sposobnosti upijanja.

#### Namjena:

- Dekubitusi od 1. do 4. stupnja.
- Postoperativne rane, vaskularne lezije.
- Opekline 1. i 2. stupnja, lezije s krhkom i osjetljivom perilezijskom kožom, mjesta kožnih transplantanata
- Može se koristiti ispod kompresivne terapije
- Površinske, granulirajuće lezije.
- Kronične i akutne eksudirajuće rane.
- Rane pune ili djelomične debljine kao što su: dekubitusi, ulkusi donjih udova, dijabetički ulkusi stopala.
- Tumorske lezije.
- Kirurške rane



Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
892910	10x10 cm	5 kom	10	 A930198193
893010	10x10 cm	10 kom	10	 A939565558
893012	10x20 cm	5 kom	10	 A973911454
893015	15x15 cm	5 kom	10	 A939565584
893020	20x20 cm	3 kom	10	 A939565610

- PRILAGODLJIVA
- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- HIPOALERGENA
- SREDNJA / VISOKA EKSUDACIJA
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM PLUS

### Sterilna poliuretanska obloga s ljepljivim rubom



Sterilna obloga s hipoalergijskim ljepljivim rubom od hidrocelularne poliuretanske pjene s višeslojnom strukturom koja osigurava postojanost i na teško dostupnim područjima, omogućujući atraumatsko uklanjanje. Kombinacija pjene s vanjskim poliuretanskim filmom čini Euroderm foam plus izvrsnim za zadržavanje tekućina, održavajući idealno vlažno okruženje za proces zacjeljivanja.

Visoka sposobnost upijanja medicinske pjene od PU omogućuje smanjenje učestalosti promjena. Upijene tekućine ravnomjerno se raspoređuju unutar pjenastog tampona koji se savršeno prilagođava mjestu rane i različitim anatomskim mjestima tijela. Ne koristiti na ranama s osjetljivom perilezionalnom kožom. Može se koristiti kao sekundarni oblog u kombinaciji s kavitarnim oblozima (alginatima, CMC), ispod kompresivnih zavoja za liječenje venskih ulkusa i u prisutnosti nekrotičnog tkiva ili fibroznih rana, u kombinaciji s Hydromed gelom. Obloga može ostati na mjestu do 7 dana.

#### Namjena:

- Dekubitusi od 1. do 4. stupnja.
- Postoperativne rane, vaskularne lezije.
- Opekline 1. i 2. stupnja, lezije s krhkom i osjetljivom perilezijskom kožom, mjesta kožnih transplantata
- Kronične i akutne eksudirajuće rane.
- Rane pune ili djelomične debljine kao što su: dekubitusi, ulkusi donjih udova, dijabetički ulkusi stopala.
- Tumorske lezije.
- Kirurške rane.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893110	10x10 cm	10 kom	10	 A939565646
893115	15 x 15 cm	5 kom	10	 A939565622
893120	20 x 20 cm	3 kom	10	 A939565685

- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- HIPOALERGENA
- NIJE POTREBNO DODATNO PRIČVRŠĆIVANJE
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- SREDNJA / VISOKA EKSDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM HEEL

Obloga od poliuretanske pjene oblikovana za ozljede pete ili lakt



Hidrocelularna poliuretanska pjena s trostrukom strukturom prilagođena za rane na petama, laktovima i sličnim morfološkim područjima. Euroderm foam heel nije ljepljiv, što olakšava promjenu obloga i smanjuje rizik od ozljeda na krhkim tkivima. Euroderm foam heel inovativnog je dizajna koji prekriva skočni zglob i stoga ne zahtijeva dodatno pričvršćivanje. Visoka sposobnost upijanja obloga od poliuretanske pjene smanjenje učestalosti promjena, što smanjuje troškove upravljanja ranom. Debljina pjene stvara učinak jastučića koji smanjuje pritisak na ranu, suprotstavlja se eventualnim trenjima i tako jamči udobnost i zaštitu pacijentu. Idealna pomoć u sprječavanju nastanka dekubitusa 1. stupnja.

### Namjena:

- Dijabetičko stopalo, dekubitus od 1. do 4. stadija, prevencija dekubitusa kod teško pokretnih bolesnika, liječenje rana na peti, laktu.
- Traumatske rane (npr. abrazije i razderotine).
- Apsorpcija eksudata kod onkoloških ulkusa (npr. vegetirajući tumori kože, kožne metastaze i Kaposijevi sarkomi).

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893060	12 x 13 cm	3 kom	10	 A939806853

- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- SA PROREZOM
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- SREDNJA / VISOKA EKSUDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM TRACHEO

### Višeslojna hidrocelularna poliuretanska pjena za traheostome



Sterilna, mekana, neljepljiva obloga od hidrocelularne poliuretanske pjene s prorezom i središnjim otvorom za umetanje kanile **za traheotomiju ili drenažu**. Sastoji se od sloja visoko upijajuće i meke poliuretanske pjene te od prozračne poliuretanske folije, koja je otporna na vodu i bakterije, ali propušta paru. Upijena tekućina ravnomjerno se raspoređuje unutar pjene. Obloga se savršeno prilagođava traheotomijskoj ili drenažnoj cjevčici, jamčeći maksimalnu udobnost za pacijenta. Visoka sposobnost upijanja omogućuje smanjenje broja mijenjanja obloga, osiguravajući udobnost pacijentu i smanjenje troškova u upravljanju ranom. **Ova obloga ne mora se promijeniti do 7 dana.**

#### Namjena:

- Upravljanje tekućinama oko mjesta umetanja kanile za traheotomiju i drenažu

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893040	8x9 cm	10 kom	10	 A939565786
893035	6,5 x 6,5 cm	10 kom	10	 A924 118209

- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- TRANSPARENTNA
- MEKANA I UDOBNA
- SIGURNO PRIANJANJE NA RUBOVE PERILEZIJE
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- NIJE POTREBNO SEKUNDARNO UČVRŠĆIVANJE ZBOG PRISUTNOSTI LJEPLJIVIH RUBOVA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM PLUS CONCAVE

### Sterilna ljepljiva obloga od poliuretanske pjene konkavna



Sterilna samoljepljiva obloga od hidrocelularne poliuretanske pjene s trostrukom strukturom, čiji se oblik prilagođava peti/laktu i drugim morfološki sličnim dijelovima tijela. Ne zahtijeva sekundarno učvršćivanje zbog prisutnosti samoljepljivih rubova. Poseban oblik obloga smanjuje mogućnost slučajnog odvajanja uslijed dugotrajnih sila trenja, produžavajući zadržavanje na mjestu rane što rezultira smanjenjem troškova za zbrinjavanje rane.

Može se koristiti kao sekundarna obloga u kombinaciji s kavitetnim oblogama, kao što su alginati i CMC-om, pogodna za korištenje pod kompresivnim zavojima ili čarapama.

#### Namjena:

- Dijabetičko stopalo, dekubitus od stadija 1 do 4.
- Prevencija dekubitusa u teško pokretnih bolesnika.
- Kirurške rane, opekline 1. i 2. stupnja.
- Mjesta uzimanja kožnih transplatanata

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893140	18 x 16,5 cm	3 kom	10	 A939565750

- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- TRANSPARENTNA
- MEKANA I UDOBNA
- SIGURNO PRIANJANJE NA RUBOVE PERILEZIJE
- POSEBAN ANATOMSKI OBLIK OMOGUĆUJE PRILAGOĐAVANJE OBLOGE SAKRALNOM PODRUČJU
- ATRAUMATSKO UKLANJANJE
- NIJE POTREBNO SEKUNDARNO UČVRŠĆIVANJE ZBOG PRISUTNOSTI LJEPLJIVIH RUBOVA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM PLUS SACRAL

### Sterilna ljepljiva obloga od poliuretanske pjene za sakralno područje



Sterilna samoljepljiva obloga od hidrocelularne poliuretanske pjene s trostrukom strukturom, koji kombinira karakteristike Euroderm pjene s praktičnošću oblika koji se prilagođava sakralnom području. Ne zahtijeva sekundarno učvršćivanje zbog prisutnosti samoljepljivih rubova. Poseban oblik obloga smanjuje mogućnost slučajnog odvajanja uslijed dugotrajnih sila trenja, produžavajući zadržavanje na mjestu rane što rezultira smanjenjem troškova za zbrinjavanje rane. Može se koristiti kao sekundarna obloga u kombinaciji s oblogama za kavitete, s alginatima i CMC-om, pogodna za korištenje pod kompresivnim zavojima ili čarapama.

#### Namjena:

- Dekubitusi u sakralnom području, stadij 1 do 4
- Kirurške rane.
- Opekline 1. i 2. stupnja.
- Mjesta uzimanja kožnih transplatanata
- Poseban anatomski oblik omogućuje savršeno prilagođavanje sakralnom području.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893150	22 x 22 cm	3 kom	10	 A939565762

- HIPOALERGENA
- SREDNJA / VISOKA EKSUDACIJA
- NE SADRŽI LATEKS



## EURODERM FOAM SILICONE

### Obloga od poliuretanske pjene sa silikonom



Sterilna, visoko upijajuća i atraumatska obloga, neljepljiva, izrađena od poliuretanske pjene smještene između gornjeg sloja poliuretana i oblikovanog sloja mekog silikonskog gela koji pranja na ranu. Kombinacija pjene i vanjske poliuretanske folije sa silikonskim unutarnjim slojem, čini Euroderm foam silicone izvrsnim za zadržavanje tekućina, održavajući vlažno okruženje idealnim za proces zacjeljivanja. Silikonski film omogućuje potpuno atraumatično uklanjanje, štiteći perilezijske rubove i novonastalo tkivo.

#### Namjena:

- Za prevenciju dekubitusa I do IV stadija i venskih ulkusa, vaskularnih lezija, opekline 1. i 2. stupnja.
- Mjesta uzimanja kožnih transplantanata
- Dekubitusi i neinficirane rane sa srednjom ili visokom produkcijom eksudata u fazi granulacije ili reepitelizacije.
- Euroderm foam silikon potrebno je dodatno pričvrstiti pomoću sekundarnog zavoja (kao što su ljepljiva traka, poliuretanski film „Euroderm“ ili „Euroderm rola“ ili kohezivni zavoj).
- U prisutnosti nekrotičnog tkiva ili fibrinoznih lezija, preporučuje se uporaba u kombinaciji s „Hydromed gelom“.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893310	10x10 cm	10 kom	10	 A975051119
893315	15 x 15 cm	5 kom	10	 A975051121
893320	20x 20 cm	3 kom	10	 A975179654

- VISOKA MOĆ UPIJANJA
- ATRAUMATSKO SKIDANJE
- ODRŽAVAJ IDEALNO VLAŽNO OKRUŽENJE ZA PROCES CIJELJENJA
- JAMČI KONTROLIRANU APSORPCIJU EKSUDATA
- HIPOALERGENA
- VISOKA PROZRAČNOST
- PRIJELAZ EKSUDATA IZ RANE NA PJENU
- SPRJEČAVANJE MACERACIJE KOŽE
- SAVRŠENO SE PRILAGOĐAVA
- IZVRSNA UDOBNOST ZA PACIJENTA



## EURODERM FOAM PLUS SILICONE

### Obloga od poliuretanske pjene sa silikonom

Sterilna obloga s ljepljivim rubom od mekog silikonskog gela koji se proteže oko centralnog visokoupijajućeg jastučića od hidrocelularne poliuretanske pjene. To olakšava fiksiranje bez ljepljive trake ili korištenja sekundarne obloge i omogućuje promjenu obloge bez traume. Obloga je obavijena s krajnjim vanjskim filmom dvostrukog poliuretanskog netkanog materijala s antibakterijskim, antivirusnim i vodootpornim svojstvima sa značajnom prozračnošću i funkcijom barijere za vanjsku kontaminaciju. Kombinacija poliuretanske pjene s mekim ljepljivim slojem od silikonskog gela i vanjskim dvoslojnim poliuretanskim netkanim filmom čini Euroderm Foam Plus Silicone izvrsnim u kontroli tekućina, održavajući idealno vlažno okruženje za proces zacjeljivanja.

#### Namjena:

- Za prevenciju dekubitusa od I. do IV. stupnja, kod vaskularnih lezija, opekotina 1. i 2. stupnja,
- Mjesta uzimanja kožnih transplantanata,
- Ulkusi i neinficirane rane sa srednjom ili visokom eksudacijom tijekom cijeljenja ili reepitelizacije
- Može se koristiti kao sekundarna obloga u kombinaciji s oblogama za kavitet (alginati - Eurosorb Roll, CMC),
- Može se koristiti ispod kompresivnih zavoja ili čarapama
- Kod prisutnosti nekrotičnog tkiva ili fibrinoznih lezija u kombinaciji s Hydromed gelom.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
893410	10x10 cm	10 kom		
893412	10 x20 cm	5 kom		
893415	15 x 15 cm	5 kom		
893420	20x 20 cm	3 kom		

# SPORTSKA LINIJA



- OLAKŠAVA BOLOVE
- ISPRAVLJA FUNKCIJU MIŠIĆA I ZGLOBOVA
- POTIČE LIMFNU CIRKULACIJU
- POMAŽE REHABILITACIJU
- LIJEČI MANJE POTKOŽNE EDEME I HEMATOME
- IDEALNO ZA SVE SPORTOVE



## EUROATHLETIC KLS

### Elastična ljepljiva kineziološka traka

Elastični ljepljivi zavoj za prirodno liječenje i prevenciju trauma, upala mišića i zglobova. Euroathletic kls for Kinesiology Taping dobro se prilagođava konturama tijela, ne ometa pokrete zglobova, jamčeći slobodu kretanja.

Radiolucantan je, dermatofilan, visoko hipoalergen, propušta zrak i vodenu paru, zahvaljujući posebnom valovitom premazu. Ne sadrži lijekove. Pospješuje limfnu drenažu, olakšava preoblikovanje zglobova, normalizira funkcije mišića.

#### Namjena:

- Za prirodno liječenje i prevenciju trauma, te upala zglobova i mišića.
- Koriste ga sportski liječnici i fizioterapeuti za liječenje bolova u mišićima i zglobovima i kod sličnih stanja.
- Koristi se i u bazenima jer je vodootporan.
- Indicirano za kineziološki taping, za fiksiranje lijekova na zglobove, u slučajevima bolova i istegnuća mišića, za lagana fiksiranja ili u slučaju potrebe za kompresijom.
- Može biti koristan u prevenciji ozljeda i trauma.
- Može ostati na licu mjesta nekoliko dana od trenutka nanošenja, s obzirom na visoku prozračnost i potpunu slobodu kretanja.
- Učestalost zamjene mora se odrediti prema mišljenju stručnjaka. Koristiti pod vodstvom specijalista sportske medicine ili fizioterapeuta koji zna kako se primjenjuje.

#### Upozorenja:

- Ne nanositi na oštećenu kožu.
- Flaster može uzrokovati blago crvenilo područja kada se ukloni.
- U slučaju intolerancije na flaster, uklonite ga i pažljivo operite mjesto primjene

#### PLAVA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
520325	5 m x 5 cm	1 kom	24	 A974773196

#### ROZA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
520355	5 m x 5 cm	1 kom	24	 A974773222

#### CRNA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
520335	5 m x 5 cm	1 kom	24	 A974773208

#### NATURAL

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
520305	5 m x 5 cm	1 kom	24	 A974773172



## EUROATHLETIC SPORT TAPE

### 100% viskozni ljepljivi neelastični zavoj

Ljepljivi flaster za funkcionalne kineziološke trake. Euroathletic sport tape trake je neelastični, visoko hipoalergijski flaster, izrađen od 100% viskozne podloge s ljepljivom masom na bazi cinkovog oksida. Ljepilo je nanošeno uzdužno u prugama, što mu osigurava veću prozračnost. Može se jednostavno ručno kidati u uzdužnom i poprečnom smjeru za brzu i laku primjenu. Zbog visoke otpornosti na napetost i snažne adhezivnosti, Euroathletic sport tape je igips izbor za postavljanje funkcionalnih traka zavoja za mišiće, ligamente i zglobove u bolničkom i sport kom okruženju.

#### Namjena:

- VODOODBOJAN
- JAKA PRILJEPLJIVOST ZA DUŽI VIJEK ZAVOJA U UVJETIMA JAKOG STRESA
- LAGANO ZA PRIMJENU
- KIDA SE RUKAMA U OBA SMJERA
- NE SADRŽI LATEKS
- Funkcionalni zavoj za smanjenje pokreta mišića, ligamenata i zglobova.
- Ozljede ligamenata i zglobova.
- Potporni zavoji kod uganuća, uganuća ili ozljeda zglobova.
- Za ortopedske imobilizacije i za fiksiranje gipsanih uduga.
- Taping za sportsku medicinu.

#### BIJELA

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
856023	10 m x 3,8 cm	1 kom	12	 A974847523
856035	14 m x 5 cm	1 kom	12	 A974847547
746033	10 m x 3,8 cm	18 kom	2	 A975883366
746032	10 m x 2,5 cm	24 kom	2	 A975883341
746035	10 m x 5 cm	12 kom	2	 A975883378
746036	14 m x 2,5 cm	48 kom	2	 A975611803
746037	14 m x 3,8 cm	32 kom	2	 A975611827
746038	14 m x 5 cm	24 kom	2	 A975611839
746039	20 m x 2,5 cm	30 kom	2	 A975611841
746040	20 m x 3,8 cm	20 kom	2	 A975611854
746041	20 m x 5 cm	5 kom	2	 A975611866

#### NATURAL

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
856024	10 m x 3,8 cm	1 kom	12	 A983526649
856036	14 m x 5 cm	1 kom	12	 A983526714





- PRILAGODLJIV
- ELASTIČAN
- IDEALAN ZA SVE SPORTOVE
- NE SADRŽI LATEKS

## EUROSAVE SALVAPELLE


### Elastični zavoj od poliuretanske pjene

Tanki poliuretanski pjenasti zavoj, elastičan, vrlo izdržljiv i visoko porozan. Predstavlja najbolje rješenje za osiguranje maksimalne udobnosti sportaša. Koristi se ispod flastera **Euroathletic sport tape** kako bi omogućio udobno i bezbolno uklanjanje tijekom natjecanja..

#### Namjena:

- Koristi se ispod krutog ljepljivog zavoja za bezbolno uklanjanje.
- Indicirano za preventivno previjanje

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
814002	27 m x 7 cm	1 kom	48	 A925008346

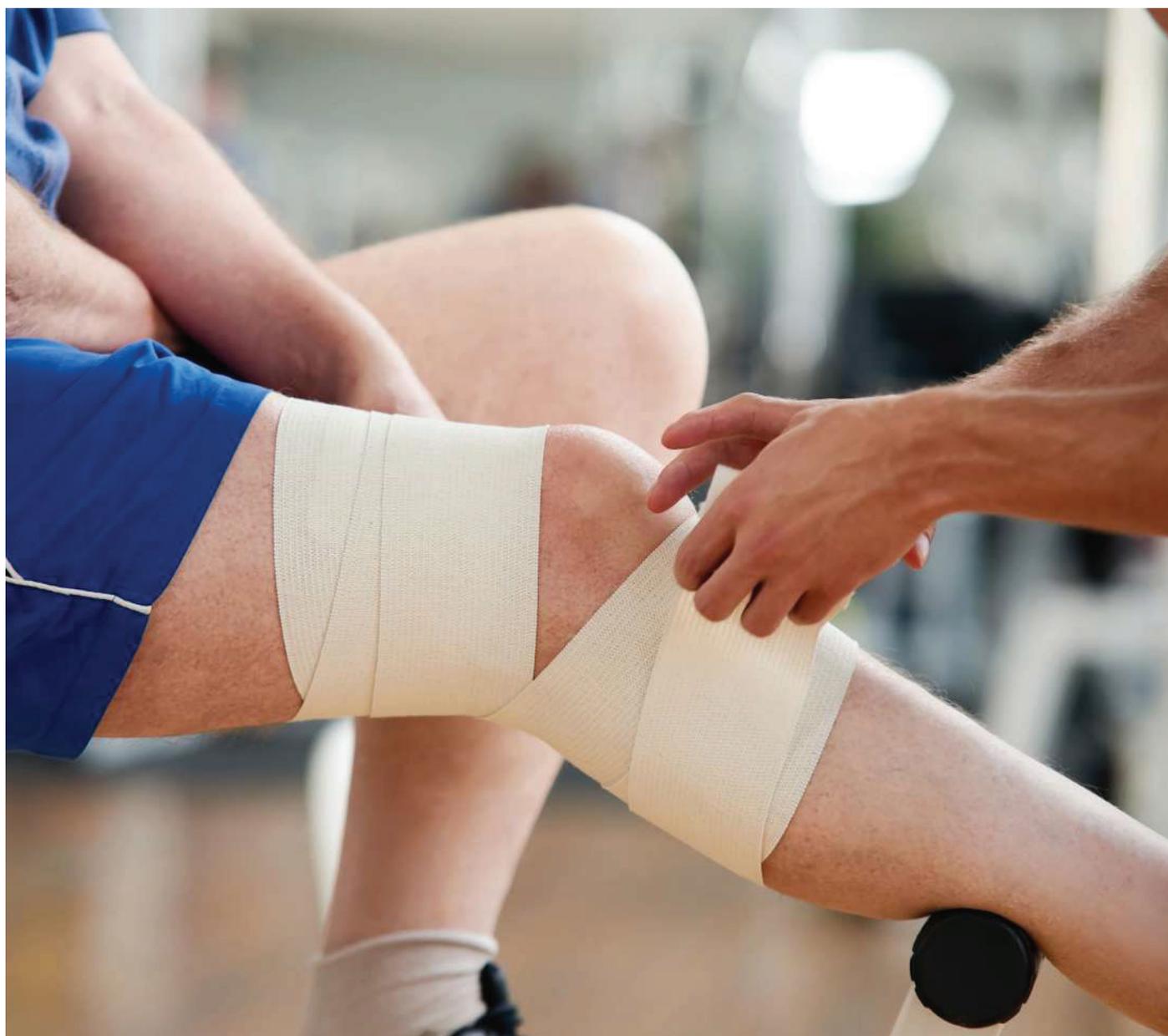

# ZAVOJI





- MEKAN
- PRILAGODLJIV
- NE PRIANJA ZA KOŽU I TKANINE
- TRANSPARENTAN
- SAMOFIKSIRANJE
- NE SADRŽI LATEKS



## EURELASTO L LATEX FREE

### Kohezivni elastični zavoj

Kohezivni elastični zavoj izrađen od pamuka, viskoze i poliamida. Posebno se koristi za učvršćivanje i primjene na teško dostupnim dijelovima tijela (glava, ruke, noge i gležnjevi), za kompresivne zavoje nakon trauma, kao protuklizni zavoj ispod kompresivnog zavoja ili za učvršćivanje nakon medicinskih obloga. Njegova prozirna struktura osigurava optimalnu izmjenu topline i vlage.

#### Namjena:

- Za pričvršćivanje i primjenu na teškim dijelovima tijela: glavi, rukama, šakama, nogama i gležnjima.
- Posttraumatski kompresijski zavoji.
- Za fiksiranje obloga.
- Za lagane potporne zavoje i u liječenju lakših prijeloma.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
516004	4 mx 4 cm	1 kom	10	 A923327771
516006	4 mx 6 cm	1 kom	10	 A923327783
516008	4 mx 8 cm	1 kom	10	 A923327795
516010	4 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327807
516012	4 mx 12 cm	1 kom	10	 A923327819
516104	20 mx 4 cm	1 kom	20	 A923327821
516106	20m x 6 cm	1 kom	20	 A923327833
516108	20m x 8 cm	1 kom	16	 A923327845
516110	20 mx 10 cm	1 kom	12	 A925008322
516112	20 mx 12 cm	1 kom	12	 A974885511



- MEKAN
- PRILAGODLJIV
- NE SADRŽI LATEKS

## EURELASTO F

### Ekstra jak ljepljivi elastični zavoj idealna za ragbi



Elastični hipoalergijski ljepljivi zavoj od 100% pamuka s pastom na bazi cinkovog oksida. Indicira se kao funkcionalni zavoj u terapiji ozljeda mišića i tetiva, uganuća, iščašenja i naprezanja.

#### Namjena:

- Sportski zavoji.
- Kompresivni zavoji.
- Funkcionalno bandažiranje u terapiji ozljeda mišića i tetiva.
- Uganuća, iščašenja i poderotine

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
508018	4,5 mx 8 cm	1 kom	8	 A927263196



- MEKAN
- PRILAGODLJIV
- HIPOALERGIJSKI
- TRANSPARENTAN
- PRISUTNOST SREDIŠNJE OBOJENE ŽICE VODILICE ZA JEDNOSTAVNU PRIMJENU

## EURELASTO

### Ljepljivi elastični zavoj od cinkovog oksida

Elastični hipoalergijski ljepljivi zavoj od 100% pamuka s pastom na bazi cinkovog oksida. Posebno se preporučuje za kompresivne zavoje u liječenju varikoznih vena i u prevenciji tromboze. Također je indiciran kao funkcionalni zavoj u terapiji ozljeda mišića i tetiva, uganuća, iščašenja i naprezanja.

#### Namjena:

- Kompresivni zavoji
- Liječenje kompleksa proširenih vena i u profilaksi tromboze.
- Funkcionalno bandažiranje u terapiji ozljeda mišića i tetiva.
- Uganuća, iščašenja i poderotine.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
508006	4,5 mx 6 cm	1 kom	72	 A902018492
508008	4,5 mx 8 cm	1 kom	72	 A902018504
508010	4,5 mx 10 cm	1 kom	36	 A902018528



- LAKO SE ATRAUMATSKI SKIDA SA KOŽE
- POTIČE RESORPCIJU HEMATOMA
- PROTUUPALNA SVOJSTVA
- LAGANO ZA PRIMJENU

## EUROZINC

### Kruti zavoj s pastom cinkovog oksida

Nerastezljivi zavoj s pastom na bazi cinkovog oksida s izraženim protuupalnim djelovanjem. Preporučuje se za terapiju ulkusa donjih ekstremiteta uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem), te za liječenje uganuća i nakon uklanjanja gipsa.

#### Namjena:

- Za liječenje ulkusa na nogama uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem)
- Za liječenje uganuća ili kao potporni zavoj.
- Pospješuje apsorpciju hematoma, kontuzija i edema.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
507005	5 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327896
507007	7 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327908
507010	10 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327910



## EUROZINC ELAST

### Elastični zavoj s pastom cinkovog oksida

Elastični zavoj s pastom na bazi cinkovog oksida s izraženim protuupalnim djelovanjem. Preporučuje se za terapiju ulkusa donjih ekstremiteta uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem), te za liječenje uganuća i nakon uklanjanja gipsa.

#### Namjena:

- Za liječenje ulkusa na nogama uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem)
- Za liječenje uganuća ili kao potporni zavoj.
- Pospješuje apsorpciju hematoma, kontuzija i edema

- ATRAUMATSKO SKIDANJE SA KOŽE
- POTIČE RESORPCIJU HEMATOMA
- PROTUUPALNA SVOJSTVA
- LAGANO ZA PRIMJENU

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
506005	5 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327922
506007	7 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327934
506010	10 mx 10 cm	1 kom	10	 A923327946



## EUROZINC ALGINATE

### Polukruti zavoj s pastom na bazi cink oksida i kalcijevim alginatom

Polu kruti zavoj s pastom na bazi cinkovog oksida i **kalcijevim alginatom**, s rashladnim učinkom i elastičan. Koristan je za liječenje akutne faze ozljeda zglobova, mišića, ligamenata i tetiva. Lako se formira i prilagođava svakoj vrsti zgloba. Također je preporučen za terapiju ulkusa donjih ekstremiteta uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem) ili kao potporni zavoj. Eurozinc alginate također se primjenjuje **kao prva pomoć kod sportskih ozljeda**. Hidrokolojne čestice osiguravaju rashlađujući učinak do otprilike 4 sata.

#### Namjena:

- Za liječenje akutne faze traume zglobova, mišića, ligamenata i tetiva.
- Za liječenje ulkusa na nogama uzrokovanih venskom insuficijencijom (varikozne vene, postflebitički sindrom i venski edem)
- Kao potporni zavoj
- Kao prva pomoć kod sportskih ozljeda

- ATRAUMATSKO SKIDANJE SA KOŽE
- POTIČE RESORPCIJU HEMATOMA
- PROTUUPALNA SVOJSTVA
- LAGANO ZA PRIMJENU

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
506035	5 mx 8 cm	1 kom	10	 A972659508
506027	7 mx 10 cm	1 kom	10	 A973645803



- ATRAUMATSKO SKIDANJE SA KOŽE
- POTIČE RESORPCIJU HEMATOMA
- PROTUUPALNA SVOJSTVA
- LAGANO ZA PRIMJENU

## EUROZINC BIELAST

### Bielastični zavoj od cinkovog oksida

Medicinski zavoj spreman za upotrebu, elastičan u uzdužnom i poprečnom smjeru, impregniran pastom na bazi cinkovog oksida s izraženim protuupalnim svojstvima, osigurava vlažno okruženje i ne isušuje se tijekom upotrebe. Lako se primjenjuje i koža ga dobro podnosi. Lako se oblikuje i prilagođava svakoj vrsti zgloba. Preporučuje se za terapiju ulkusa donjih ekstremiteta uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem), za liječenje uganuća ili kao potporni zavoj.

#### Namjena:

- Za liječenje ulkusa na nogama uzrokovanih venskom insuficijencijom (varikozne vene, postflebitički sindrom i venski edem).
- Za liječenje uganuća ili kao potporni zavoj.
- Pospješuje apsorpciju hematoma, kontuzija i edema.
- Za liječenje akutne faze traume zglobova, mišića, ligamenata i tetiva

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
506105	5 mx 10 cm	1 kom	10	 A975050283
506107	7 mx 10 cm	1 kom	10	 A975050360
506110	10 mx 10 cm	1 kom	10	 A975050321



- MOŽE SE PRATI I PONOVRNO UPOTREBITI
- UDOBAN
- TRANSPARENTAN
- HIPOALERGIJSKI
- OTPORNO NA ULJA I MASTI

## FLEBIMED SHORT

### Kratkoelastični kompresivni zavoj

Elastični neprianjajući kompresivni zavoj, s kratkom rastezljivošću (<40%) od pamuka i poliamida u boji kože, hipoalergen i prozračan, za višekratnu upotrebu, otporan na opetovano istezanje i pranje, može se sterilizirati. Opremljen kopčama. Ne deformira se i ne trga, lako se odmotava bez stvaranja nabora. Nježna tekstura osigurava prozračnost kože i ne izaziva iritaciju kože. Otporan je na ulja i masti. Bez lateksa.

#### Namjena:

- Kao potporni i olakšavajući zavoji u slučaju modrica, uganuća, iščašenja i kod tendinopatija, za imobilizaciju zglobova
- Za zaštitu od hematoma kod ozljeda mišića
- Prikladno za flebološku primjenu

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
527006	5 mx 6 cm	1 kom	10	 A927263246
527008	5 mx 8 cm	1 kom	10	 A927263259
527010	5 mx 10 cm	1 kom	10	 A927263261



- MOŽE SE PRATI I PONOVRNO UPOTREBITI
- UDOBAN
- HIPOALERGIJSKI
- OTPORNO NA ULJA I MASTI



## FLEBIMED MEDIA

### Elastični kompresivni zavoj srednje rastezljivosti

Neljepljivi elastični kompresivni zavoj srednje rastezljivosti od čistog pamuka boje kože, hipoalergen i prozračan, za višekratnu upotrebu, otporan na opetovano istezanje i pranje, može se sterilizirati. Opremljen kopčama. Lako se nanosi, ne deformira se i ne trga. Omogućuje savršeno prijanjanje na različite anatomske konformacije obloke. Lako se odmotava bez gužvanja. Nježna tekstura osigurava prozračnost kože i ne izaziva iritaciju kože. Otporan je na ulja i masti. Bez lateksa.

#### Namjena:

- Za liječenje kronične venske insuficijencije.
- Kod primarnih i sekundarnih varikoziteta
- Ulkusi donjih udova
- Edem.
- Tromboflebitis.
- Flebotromboza.
- Nakon sklerozacije vena

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
527108	5 mx 8 cm	1 kom	10	 A927263297
527110	5 mx 10 cm	1 kom	10	 A927263309



- MOŽE SE PRATI I PONOVRNO UPOTREBITI
- UDOBAN
- TRANSPARENTAN
- HIPOALERGIJSKI
- OTPORNO NA ULJA I MASTI

## FLEBIMED FORTE

### Snažni elastični kompresivni zavoj visoke rastezljivosti

Neprianjajući monoelastični kompresivni zavoj s visokom rastezljivošću (170%) od pamuka i poliuretana u boji kože, hipoalergen i prozračan, za višekratnu upotrebu, otporan na opetovano istezanje i pranje, može se sterilizirati. Opremljen kopčama. Lako se nanosi, ima trajnu elastičnost, ne deformira se, ne trga se, lako se odmotava bez stvaranja nabora. Nježna tekstura osigurava prozračnost kože i ne izaziva iritaciju kože. Otporan je na ulja i masti. Bez lateksa.

#### Namjena:

- Potporni zavoj s jakom, konstantnom kompresijom, idealan za liječenje varikoznog simptomatskog kompleksa.
- Za prevenciju i liječenje sportskih i radnih ozljeda, indiciran za potporu i olakšanje kod uganuća, iščašenja, kontuzija i lakših prijeloma.

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
527208	7 mx 8 cm	1 kom	10	 A927263335
527210	7 mx 10 cm	1 kom	10	 A927263347



- MOŽE SE PRATI I PONOVRNO UPOTREBITI
- UDOBAN
- TRANSPARENTAN
- HIPOALERGIJSKI
- OTPORNO NA ULJA I MASTI

## FLEBIMED BIELAST

### Visoko rastezljivi dvoelastični kompresivni zavoj

Neprianjajući dvoelastični kompresivni zavoj visoke rastezljivosti u uzdužnom i poprečnom smjeru od pamuka, poliamida i poliuretana, u boji kože, hipoalergenski i prozračan, za višekratnu upotrebu, otporan na višekratno istežanje i pranje, može se sterilizirati. Opremljen kopčama. Ne deformira se i ne trga, lako se odmotava bez stvaranja nabora. Nježna tekstura osigurava prozračnost kože i ne izaziva iritaciju kože. Otporan je na ulja i masti. Bez lateksa.

#### Namjena:

- Za potporne zavoje i jaku stalnu kompresiju.
- Za postkirurške kompresijske zavoje.
- Za liječenje varikoznog simptomatskog kompleksa.
- Također za prevenciju i liječenje sportskih i radnih ozljeda.
- Za potporu i olakšanje kod uganuća i iščašenja.
- Višesmjerna rastezljivost čini ga posebno pogodnim za previjanje zglobova

Šifra	Veličina	Kom/pak	Pak/karton	Barkod
527308	7 m x 8 cm	1 kom	8	 A927263374
527310	7 m x 10 cm	1 kom	8	 A927263386
527312	7 m x 12 cm	1 kom	8	 A927263398





## LEGENDA PROIZVODA

### Priprema mjesta, rane

PROIZVODI		Kronične rane	Akutne rane	Opekotine 1. stupnja	Opekotine 2. stupnja	Opekotine 3. stupnja	Opekotine 4. stupnja	Inficirane rane
<b>VULNOMED</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• neutralizira: pomaže u normalizaciji pH vrijednosti vagine i liječenju vulvovaginitisa</li> <li>• antiseptik: smanjuje bakterijsku opterećenost u inficiranim ranama</li> <li>• razgradnja: pomaže u razgradnji biofilmova u inficiranim ranama.</li> <li>• umiruje: pomaže kod pelenskog dermatitisa i crvenila.</li> <li>• obnavlja: koristan je za liječenje ozljeda, opekotina, eritema, abrazija, ogrebotina i mjehurića</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>EURODRESSING</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• brzo upija</li> <li>• hipoalergijska</li> <li>• posebno mekana</li> <li>• ne raspršuje vlakna</li> <li>• ne prijanja na ranu u odnosu na tradicionalne pamučne gaze</li> <li>• uklanja se bez pucanja kože</li> <li>• može se koristiti za uklanjanje sekreta i nekrotičnog tkiva</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Od nekrotičnih do hipertrofičnih rana

PROIZVODI	Nekrotične rane suhe	Nekrotične rane s umjerenom eksudacijom	Nekrotične rane izrazite eksudacije	Eksudacija
<p><b>HYDROMED GEL</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• lako se primjenjuje i uklanja</li> <li>• rehidrira nekrotična tkiva, nježno ih uklanjajući</li> <li>• upija višak eksudata iz rane</li> <li>• biokompatibilan</li> <li>• proziran za precizniju medicinsku njegu rane</li> <li>• ima značajna hidratantna svojstva</li> <li>• ostaje na mjestu nakon primjene</li> </ul>	✓	✓	✗	 Slaba
<p><b>EUROSORB</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• visoka moć upijanja</li> <li>• otpušta ione kalcija na ranu.</li> <li>• smanjuje rizik od pucanja kože na perilezionalnim rubovima rane.</li> <li>• pretvara se u gel koji ne prijanja na ranu i sprječava bočno izlivanje sekreta</li> <li>• održava vlažno okruženje, potičući zacjeljivanje rane.</li> <li>• lako se uklanja atraumatski.</li> <li>• ostaje netaknut prilikom uklanjanja.</li> <li>• zadržava sekret čak i ispod okluzivnog zavoja.</li> <li>• vertikalno upijanje</li> </ul>	✗	✓	✓	 Srednje Jaka
<p><b>EUROCELL HYDRO</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• formira kristalni gel koji pomaže u održavanju vlažnog okruženja za olakšavanje procesa zacjeljivanja rana.</li> <li>• pomaže u uklanjanju nekrotičnog tkiva s rane, a da pri tome ne oštećuje novoformirano tkivo.</li> <li>• preporučuje se za upravljanje akutnim i kroničnim ranama, parcijalnim i pune debljine, s umjerenim ili jakim sekretom.</li> <li>• može se ukloniti u jednom komadu, bez potrebe za ispiranjem i bez rizika od oslobađanja vlakana.</li> <li>• može se koristiti ispod kompresivnih zavoja ili čarapa.</li> <li>• ne uzrokuje pucanje perilezionalnih rubova rane.</li> <li>• uklanjanje je atraumatsko</li> </ul>	✗	✓	✓	 Srdnje Jaka
<p><b>EURODERM FOAM</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• obloga se savršeno prilagođava ležištu rane, što je idealno okruženje za proces zacjeljivanja.</li> <li>• posebna struktura "s ravnim rubom" olakšava primjenu sekundarnog zavoja (npr. Ljepljiva traka, poliuretanska folija - Euroderm ili Euroderm roll ili kohezivni zavoj) i osigurava dodatnu zaštitu od curenja tekućine.</li> <li>• visoko upijajuća</li> <li>• uklanjanje je bezbolno i bez traumatskog učinka.</li> <li>• ne uzrokuje pucanje perilezionalnih rubova rane</li> <li>• može se koristiti ispod kompresivnih zavoja ili čarapa.</li> <li>• troškovno učinkovit, ne zahtijeva česta mijenjanja</li> </ul>	✗	✓	✓	 Jaka

## Od nekrotičnih do granulacijskih rana

PROIZVODI		Dekubitus	Arterijski i venski ulkusi	Ulкуси dijabetičkog stopala	Od fibroznih do granulacijskih rana	Traumatske rane	Opekotine 2. stupnja	Mjesta traheotomije i drenaže	Eksudacija
<b>EURODERM FOAM</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• obloga se savršeno prilagođava ležištu rane</li> <li>• prozirna i propusna na vodenu paru okruženje za proces zacjeljivanja.</li> <li>• posebna struktura "s ravnim rubom" olakšava primjenu sekundarnog zavoja (kao što su ljepljiva traka, poliuretanska folija - Euroderm ili Euroderm roll ili kohezivni zavoj) i osigurava dodatnu zaštitu od curenja tekućine</li> <li>• visoko upijajuća</li> <li>• uklanjanje je bezbolno i bez traumatskog učinka</li> <li>• ne uzrokuje pucanje perilezionalnih rubova rane</li> <li>• može se koristiti ispod kompresivnog zavoja ili čarape</li> <li>• troškovno učinkovit, ne zahtijeva česta mijenjanja.</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Srednje Jaka
<b>EURODERM FOAM HEEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ima visoku sposobnost upijanja koja smanjuje broj promjena, čime se smanjuju troškovi u upravljanju ranom</li> <li>• visoko upijajuća</li> <li>• uklanjanje je bezbolno i bez traumatskog učinka</li> <li>• pomaže u prevenciji nastanka dekubitusa 1. stupnja</li> <li>• ne zahtijeva dodatnu fiksaciju</li> <li>• dobra zaštita od sila trenja i rezanja</li> </ul>		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	 Srednje Jaka
<b>EURODERM FOAM TRACHEO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• obloga se savršeno prilagođava kanili traheotomije ili drenaže, osiguravajući maksimalnu udobnost za pacijenta</li> <li>• visoka sposobnost upijanja poliuretanske pjenaste obloge omogućava smanjenje broja promjena, čime se osigurava udobnost pacijenta i smanjuju troškovi u upravljanju ranom</li> <li>• visoko upijajuća</li> <li>• uklanjanje je bezbolno i bez traumatskog učinka</li> <li>• opremljena je predrezom za savršeno prilagođavanje oko mjesta traheotomije i drenaže.</li> </ul>		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	 Srednje Jaka

## Inficirane rane

PROIZVODI	Dekubitus	Arterijski i venski ulkusi	Ulkus dijabetičkog stopala	Opekline 2. stupnja	Hematom nakon vadenja krvi	Mjesta uzimanja kožnih transplantata	Eksudacija
<p><b>SILVERMED SB</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• hipoalergijska</li> <li>• mekana</li> <li>• traumatska promjena obloge</li> <li>• prilagodljiva bilo kojoj vanjskoj anatomskej površini</li> <li>• spremna za upotrebu i ne zahtijeva aktivaciju</li> <li>• potiče stvaranje granulacijskog tkiva i posljedičnu epitelizaciju</li> <li>• smanjuje prisutnost devitaliziranog tkiva</li> <li>• štiti ranu od egzogene bakterijske kontaminacije</li> <li>• može se rezati</li> <li>• učinkovito smanjuje neugodne mirise</li> <li>• oslobađa srebrne ione, održavajući bakteriostatsko okruženje unutar obloge</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Slaba
<p><b>SILVERMED</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• prozirna i propusna za vodenu paru</li> <li>• hipoalergijska</li> <li>• mekana</li> <li>• traumatsko mijenjanje obloge</li> <li>• prilagodljiva bilo kojoj vanjskoj anatomskej površini</li> <li>• spremna za upotrebu i ne zahtijeva aktivaciju</li> <li>• potiče stvaranje granulacijskog tkiva i posljedičnu epitelizaciju</li> <li>• smanjuje prisutnost devitaliziranog tkiva</li> <li>• štiti ranu od egzogene bakterijske kontaminacije</li> <li>• održava ranu u optimalnim vlažnim uvjetima</li> <li>• učinkovito smanjuje neugodne mirise</li> <li>• oslobađa srebrne ione, održavajući bakteriostatsko okruženje unutar obloge</li> <li>• nije potrebno sekundarno učvršćivanje zbog prisutnosti ljepljivih rubova.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Slaba

## Od granulirajućih do epitelih rana

PROIZVODI		Dekubitisi	Arterijski i venski ulkusi	Ulkusi dijabetičkog stopala	Od granulirajućih rana do rana s kožnim novotvorinama	Traumatske ozljede	Opekotine 2. stupnja	Površinske akutne rane	Mjesta uzimanja kožnih transplantata	Eksudacija
<b>EURODERM FOAM PLUS CONCAVE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• idealna za petu/lakat i druge dijelove tijela slične morfologije</li> <li>• visoko upijajuća i prozirna</li> <li>• bezbolno uklanjanje bez traume</li> <li>• može se koristiti kao sekundarna obloga u kombinaciji s kavitarnim oblogama, gazama, alginatima, CMC, ispod kompresivnih zavoja i čarapa</li> <li>• mekana i udobna</li> <li>• sigurno prianjanje uz rubove perilezija</li> <li>• ne zahtijeva sekundarno pričvršćivanje zbog prisutnosti ljepljivih rubova</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Slaba Srednja
<b>EURODERM FOAM PLUS</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• obloga se savršeno prilagođava rani, stvarajući idealno okruženje za proces zacjeljivanja.</li> <li>• visoka upijajuća sposobnost PU pjenaste obloge omogućuje smanjenje broja prijetoja, osiguravajući udobnost pacijentu i smanjenje troškova u upravljanju ranom.</li> <li>• posebna struktura s "ravnim rubovima" olakšava primjenu sekundarne učvršćujuće obloge (po potrebi ljepljiva traka, poliuretanski film Euroderm ili Euroderm roll, ili kohezivni zavoj) i osigurava dodatnu zaštitu od curenja tekućine</li> <li>• visoko upijajuća</li> <li>• bezbolno uklanjanje bez traume</li> <li>• ne zahtijeva sekundarno pričvršćivanje zbog prisutnosti ljepljivih rubova</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Slaba Srednja
<b>EURODERM PLUS SACRAL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• idealno za sakralno područje i druge dijelove tijela slične morfologije</li> <li>• visoko upijajuća i prozirna</li> <li>• bezbolno uklanjanje bez traume</li> <li>• može se koristiti kao sekundarna obloga u kombinaciji s kavitarnim oblogama, gazama, alginatima, CMC, ispod kompresije</li> <li>• mekana i udobna</li> <li>• sigurno prianjanje uz rubove perilezija</li> <li>• ne zahtijeva sekundarno pričvršćivanje zbog prisutnosti ljepljivih rubova</li> <li>• poseban anatomske oblik omogućuje da se obloga prilagodi sakralnom području</li> </ul>		✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	 Slaba Srednja
<b>HYDROMED GEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• nanesen na ranu, rehidrira nekrotično tkivo i nježno ga uklanja</li> <li>• upija višak sekreta iz rane</li> <li>• gel stvara vlažno okruženje na površini rane, sprječavajući stvaranje krasta i ubrzavajući migraciju epitelih stanica</li> <li>• Hydromed gel se koristi za autolitičko čišćenje rana</li> <li>• visoka i dugotrajna sposobnost upijanja</li> <li>• visoka kohezivna snaga gela</li> </ul>		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	 Slaba Srednja

PROIZVODI		Dekubitusi	Arterijski i venski ulkusi	Ulкуси dijabetičkog stopala	Od granulirajućih rana do rana s kožnim novotvorinama	Traumatske ozljede	Opekotine 2. stupnja	Površinske akutne rane	Mjesta uzimanja kožnih transplantata	Eksudacija
<p><b>EURODERM PLUS</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• vrlo jednostavna za primjenu</li> <li>• održava vlažnu mikroklimu rane kako bi potaknulo zacjeljivanje i smanjilo bol</li> <li>• omogućuje pacijentu redovito tuširanje ili kupanje</li> <li>• prozračna je i propusna za vodenu paru, sprječava pucanje kože i može ostati na mjestu do 5 dana</li> <li>• zaštita od vode i bakterija</li> <li>• transparentna</li> <li>• omogućuje praćenje napretka rane</li> <li>• tanka i fleksibilna, prilagođava se svakom dijelu tijela</li> </ul>	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	 Slaba	



## Postoperativne i manje rane

PROIZVODI		Sloj primarnog kontakta rane kojeg podržava sekundarni oblog	Održavanje mikroklimne rane	Lagane opekline	Postoperativne rane	Maleni ulkusi donjih ekstremiteta	Eksudacija
<b>EUODRESSING</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• brzo upijanje</li> <li>• hipoalergijska</li> <li>• posebno mekana</li> <li>• ne raspršuje vlakna</li> <li>• ne prijanja uz ranu u usporedbi s tradicionalnim pamučnim gazama</li> <li>• uklanja se atraumatski</li> <li>• može se koristiti za uklanjanje sekreta i nekrotičnog tkiva</li> </ul>		✓	✗	✓	✗	✓	 Slaba
<b>EUROMED</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostavna za primjenu</li> <li>• mekana i prilagodljiva</li> <li>• ne ograničava micanje/kretanje kože</li> <li>• prozirna</li> <li>• atraumatsko uklanjanje</li> </ul>		✗	✓	✓	✓	✓	 Slaba
<b>EUROMETAL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• vanjski film premazan je čistim aluminijem koji omogućuje brže zacjeljivanje</li> <li>• brza apsorpcija</li> <li>• hipoalergijska</li> <li>• posebno mekana</li> <li>• ne raspršuje vlakna</li> <li>• ne prijanja uz ranu u usporedbi s tradicionalnim pamučnim gazama</li> <li>• uklanja se atraumatski</li> <li>• osigurava antibakterijsko djelovanje</li> </ul>		✗	✓	✓	✓	✓	 Slaba







 **eurofarm**<sup>®</sup>  
ADVANCED MEDICAL DEVICES

## Uvoznik i distributer:



### **BAUERFEIND d.o.o.**

#### **UPRAVA**

Goleška 20,  
10020 Zagreb  
T 01 654 28 55  
info@bauerfeind.hr

### **Zagreb**

Draškovićeve 56  
T 01 481 49 19

### **Zagreb**

Ilica 167a  
T 01 35 35 171

### **Zagreb**

Božidarevićeve 13  
T 01 244 41 60

### **Čakovec**

Svetojelenska cesta 7  
T 040 823 026

### **Dubrovnik**

Ulica dr. Ante Šercera 1b  
T 020 77 02 21

### **Karlovac**

Trg Hrvatskih branitelja 4  
T 047 432 344

### **Koprivnica**

Željka Selinger 2a  
T 048 210 140

### **Osijek**

Vukovarska 12  
T 031 372 474

### **Pula**

Ulica Marsovo polje 10  
T 052 544 393

### **Rijeka**

Verdijeva 5b  
T 051 312 213

### **Slavonski Brod**

Ulica Vladimira Nazora 1  
T 035 407 350

### **Split**

Spinčićeve 2b  
T 021 770 462

### **Varaždin**

Trg kralja Petra Svačića 1a  
T 042 313 989

### **Vinkovci**

Ante Starčevića 51  
T 032 308 411

### **Virovitica**

Stjepana Radića 28  
T 043 331 123

### **Zadar**

Kolovare 9  
T 023 254 500